




95. 噻虫胺
(clothianidin)

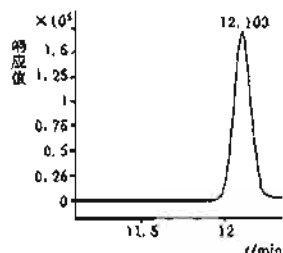


96. 拿草特
(pronamide)

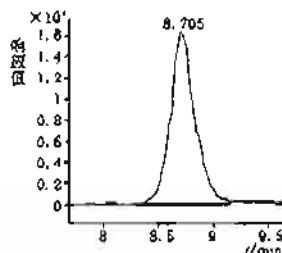


97. 二甲草胺
(dimethachloro)

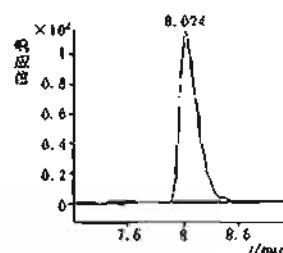


98. 溴谷隆
(methobromuron)

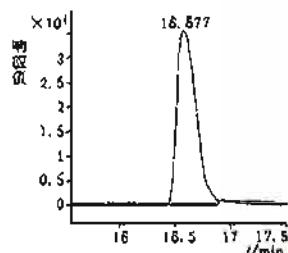


99. 甲拌磷
(phorate)

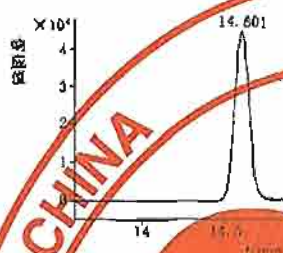


100. 杀草醚
(acifluorfen)

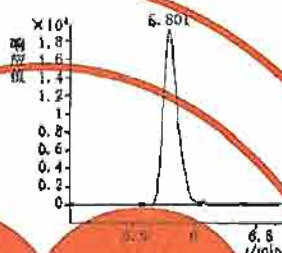


101. 地安磷
(mephosfolan)

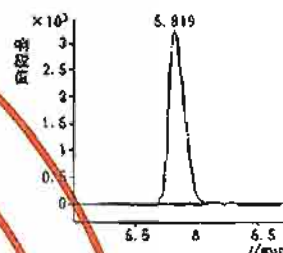


102. 脱苯甲基亚胺唑
(mibenzonazole-des-benzyl)

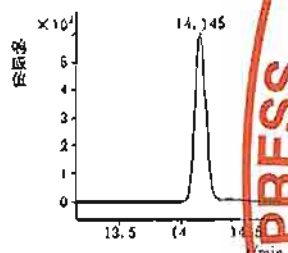


103. 草不隆
(neburon)

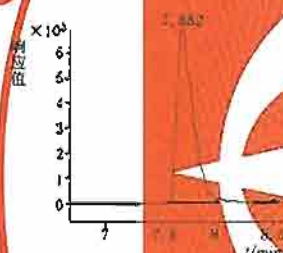


104. 精甲霜灵
(mefenoxam)

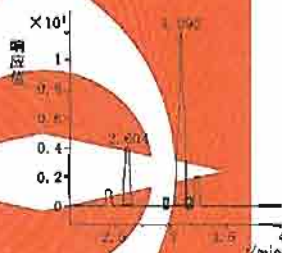


105. 发硫磷
(prothiophate)

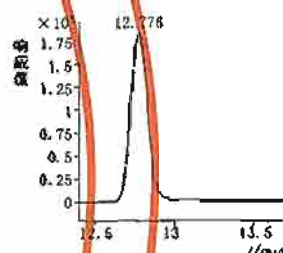


106. 乙氧呋草膦
(ethofume sate)

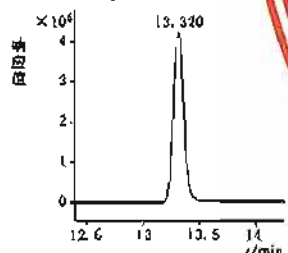


107. 异稻瘟净
(iprobenfos)

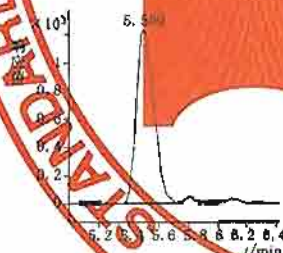


108. 特普
(TEPP)

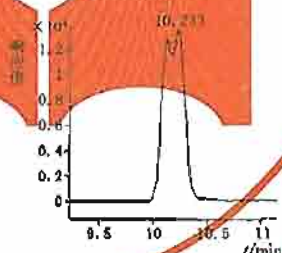


109. 环丙唑醇
(cyproconazole)

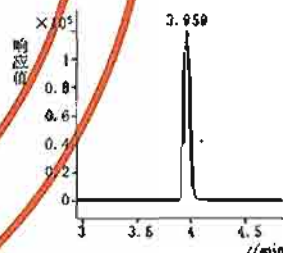


110. 噻虫啉
(thiamethoxam)

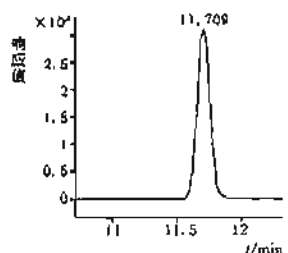


111. 育奇磷
(cruformate)

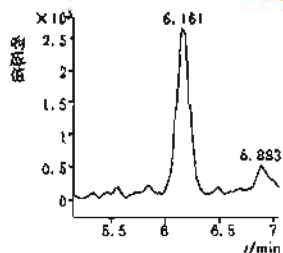


112. 乙嘧硫磷
(etrimfos)

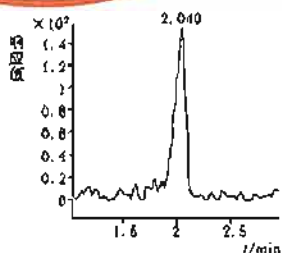


113. 杀鼠醚
(coumatetralyl)

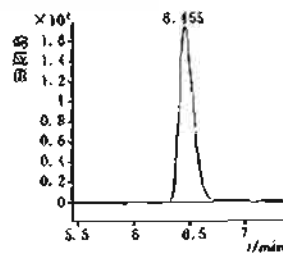


114. 赛灭磷
(cythioate)

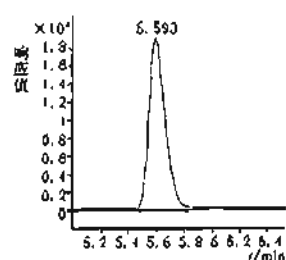


115. 磷胺
(phosphamidon)

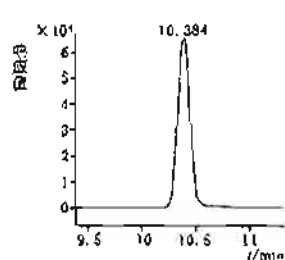


116. 甜菜宁
(phenmediphem)

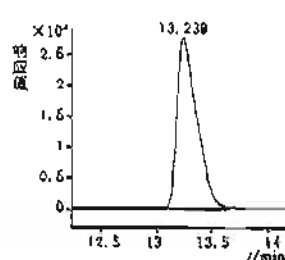


117. 联苯并酯
(bifenazate)

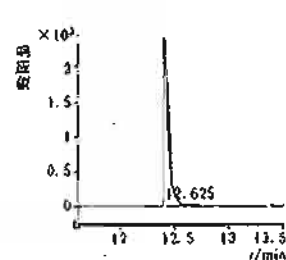


118. 环酰菌胺
(fenhexamid)

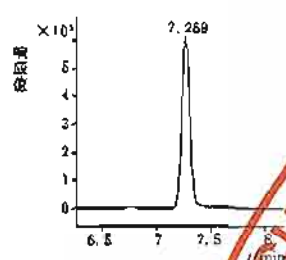


119. 粉唑醇
(flutriafol)

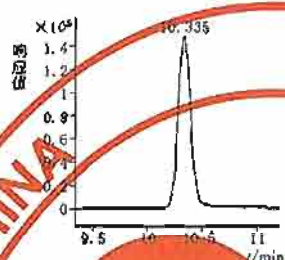


120. 烯菌丙胺酯
(fenoxystyrene)

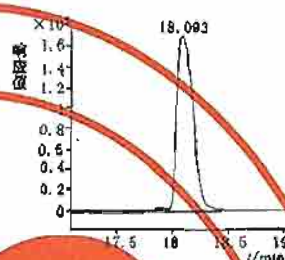


121. 生物丙烯菊酯
(bifenthrin)

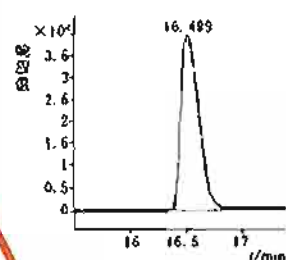


122. 苯腈磷
(cyanofenphos)

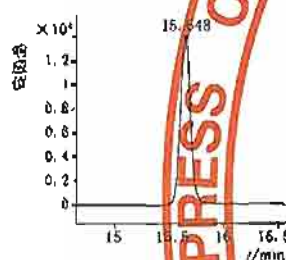


123. 甲基嘧啶磷
(pirimiphos methyl)

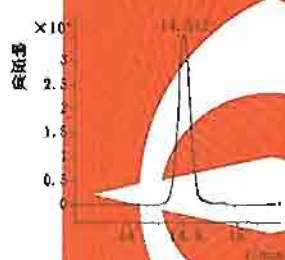


124. 啉啉酮
(luoprolin)

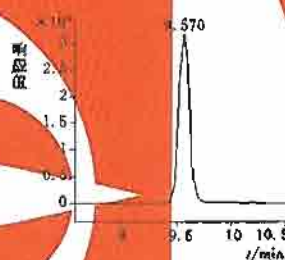


125. 乙拌磷磺
(disulfoton sulfone)

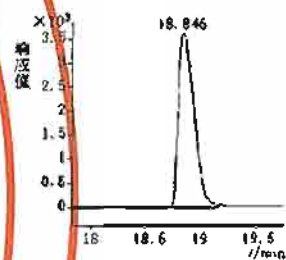


126. 啉啉啉
(fenazaquin)

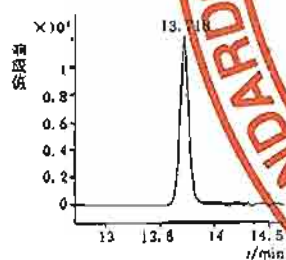


127. 三唑磷
(triazophos)

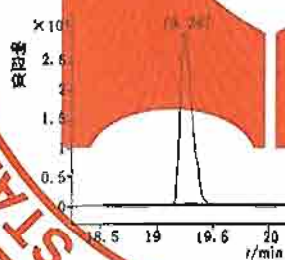


128. 脱叶磷
(DEF)

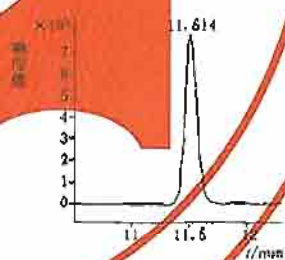


129. 环酯草醚
(pyrifthalid)

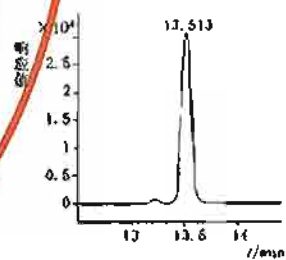


130. 叶窗唑
(metconazole)

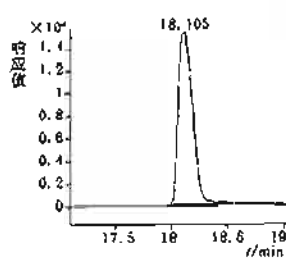


131. 蚊蝇醚
(pyriproxyfen)

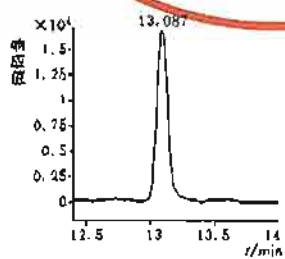

















132. 异噁唑草胺
(isoxaben)

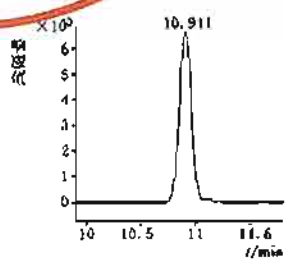





133. 呋草酮
(flurtamone)

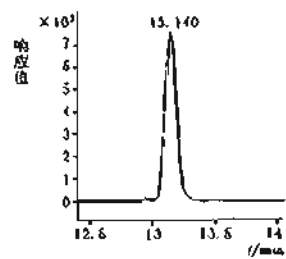


134. 氟乐灵
(trifluralin)

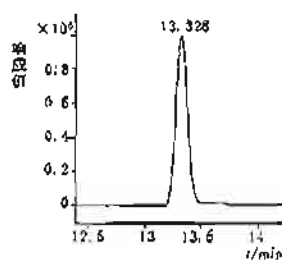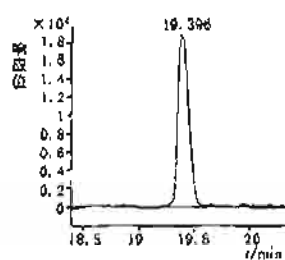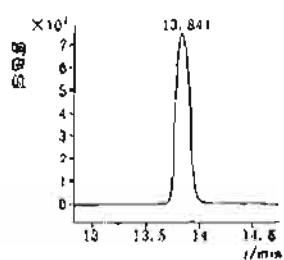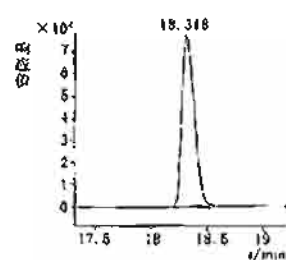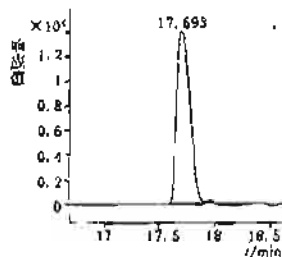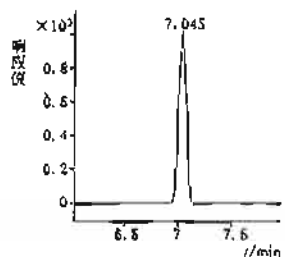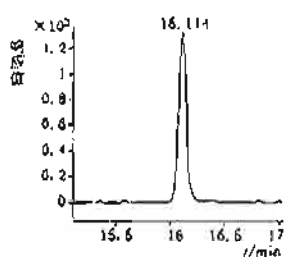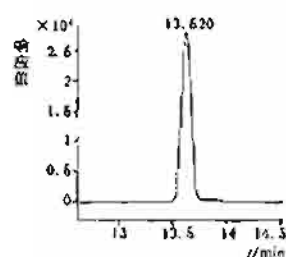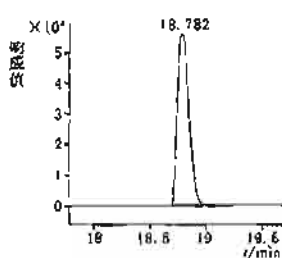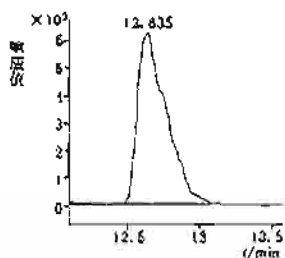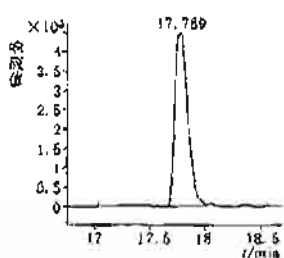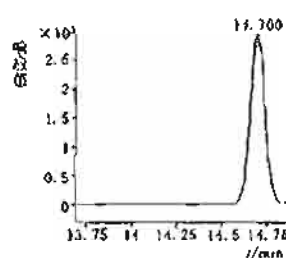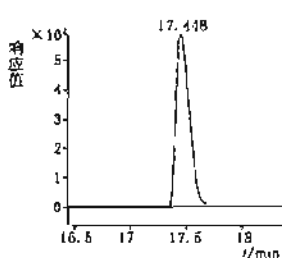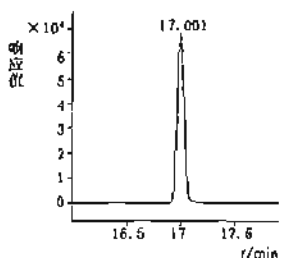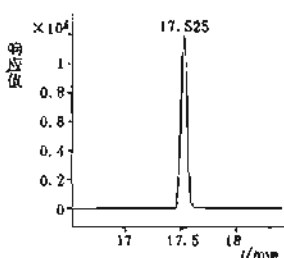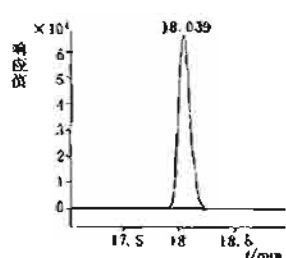
135. 甲基 麦草氟异丙酯
(flamprop methyl)136. 生物吡啶菊酯
(bioresmethrin)137. 丙环唑
(propiconazole)138. 毒死蜱
(chlorpyrifos)139. 氟乙氧灵
(fluchloralin)140. 氯磺隆
(chlorsulfuron)141. 麦草氟异丙酯
(flamprop isopropyl)142. 杀虫畏
(tetrachlorvinphos)143. 炔烯特
(propargite)144. 溴菌唑
(bromuconazole)145. 氟吡啶草胺
(picolinafen)146. 氟噻乙草酯
(fluthiacet methyl)147. 肟菌酯
(trifloxystrobin)148. 氟铃脲
(hexaflumuron)149. 氟酰脲
(novaluron)150. —
(flurazuron)

C 组

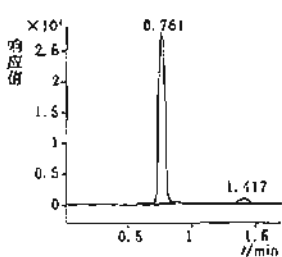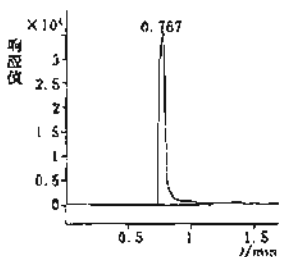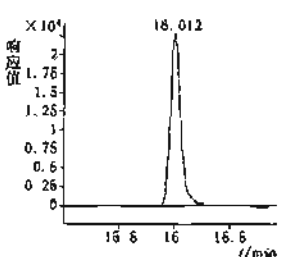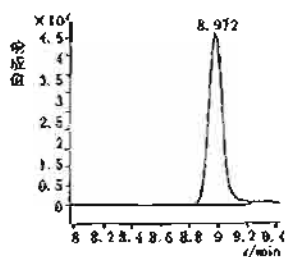
151. 抑芽丹
(maleic hydrazide)152. 甲胺磷
(methamidophos)153. 苗草敌
(EPTC)154. 避蚊胺
(diethyltoluamide)

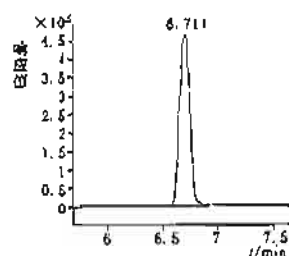


155. 灭草隆
(monuron)

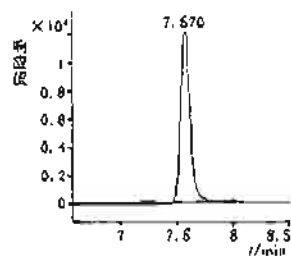


156. 嘧啶胺
(pyrimethanil)

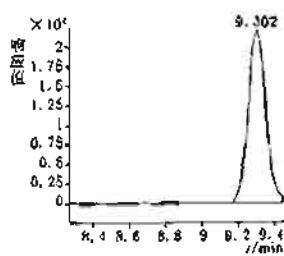


157. 黑德胺
(fenfuram)

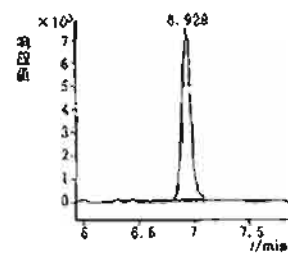


158. 灭藻胺
(quinoclamine)

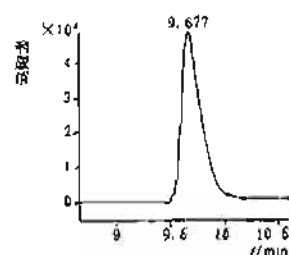


159. 仲丁威
(fenobucarb)

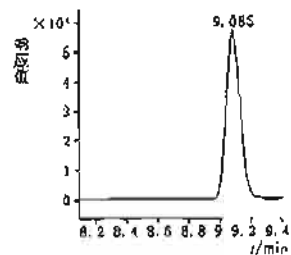


160. 敌稗
(propanil)

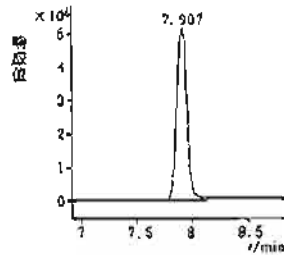


161. 克百威
(carbofuran)

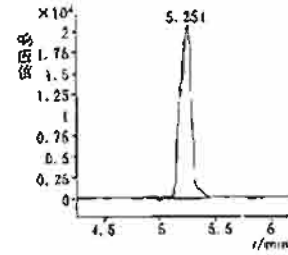


162. 啶虫脒
(acetamiprid)

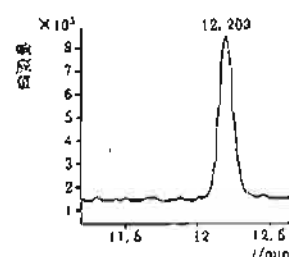


163. 噁嗪胺
(mepanipyrim)

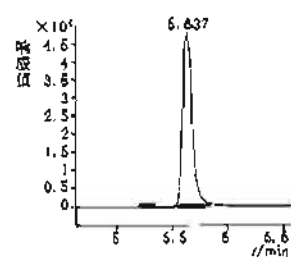


164. 扑灭通
(prometon)

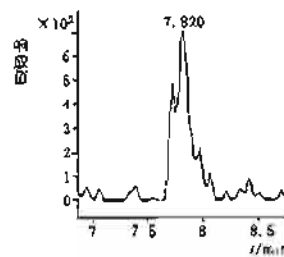


165. 甲硫威
(methiocarb)

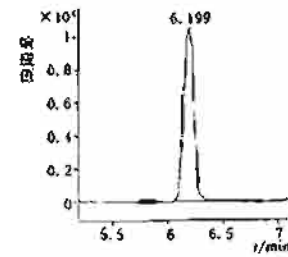


166. 甲氧隆
(metoxuron)

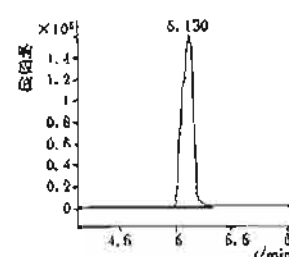


167. 乐果
(dimethoate)

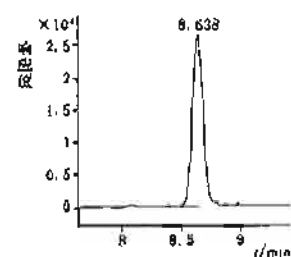


168. 伏草隆
(fluometuron)

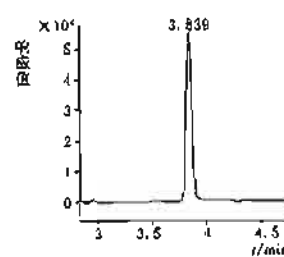


169. 百治磷
(dicrotophos)

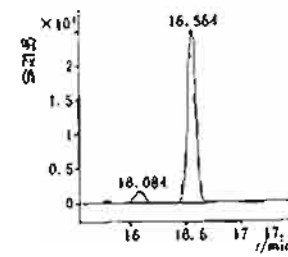


170. 庚酸草胺
(monalide)

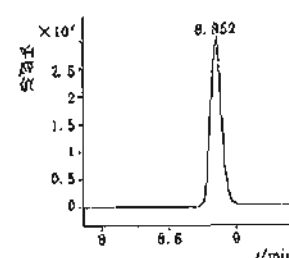


171. 双苯酰草胺
(diphenamid)

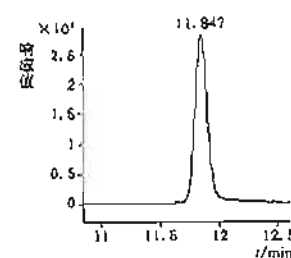


172. 灭线磷
(ethoprophos)

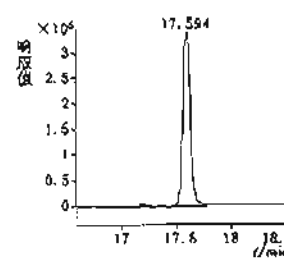


173. 地虫硫磷
(fonofos)

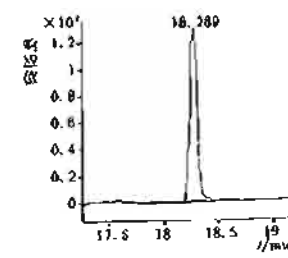


174. 土菌灵
(etridiazol)

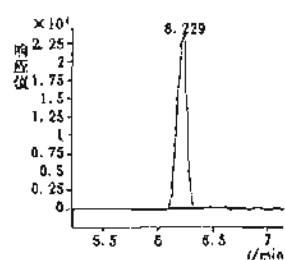


175. 环嗪酮
(hexazinone)

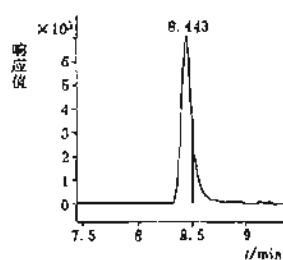


176. 阔草净
(dimethametryn)

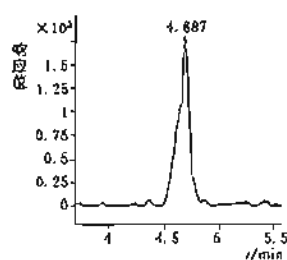


177. 敌百虫
(trichlorphon)

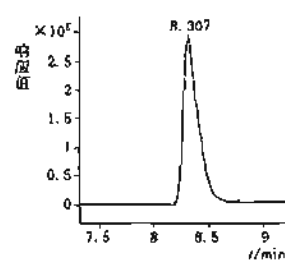


178. 内吸磷
[demeton(o+s)]

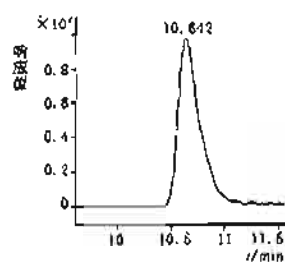


179. 解草酮
(benoxacor)

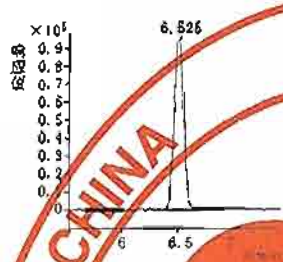


180. 除草定
(bromacil)

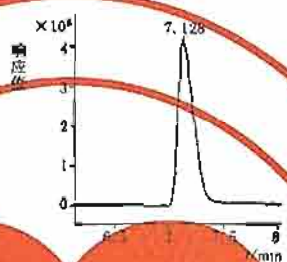


181. 甲拌磷亚磷
(phorate sulloside)

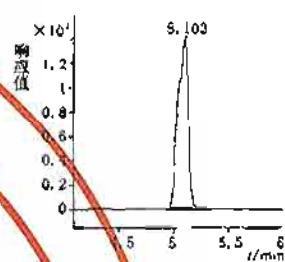


182. 溴吡嗪
(brompyrazon)

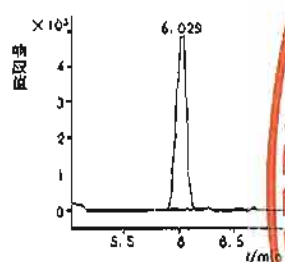


183. 氧化萎锈灵
(oxycarboxin)

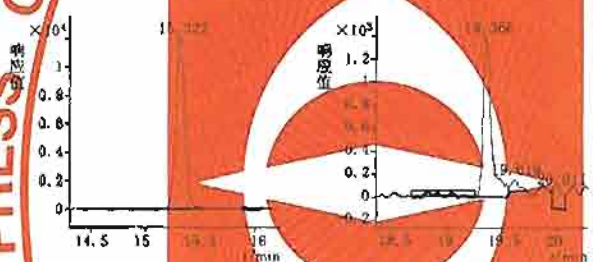


184. 灭锈胺
(mepronil)

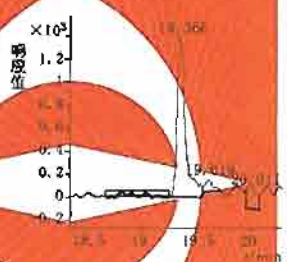


185. 乙拌磷
(disulfoton)

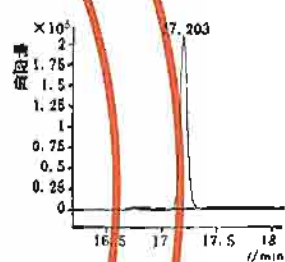


186. 倍硫磷
(fenitrothion)

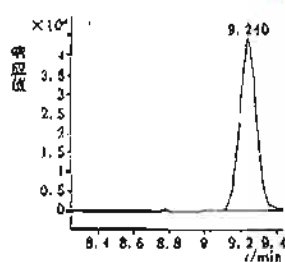


187. 甲霜灵
(metaxyl)

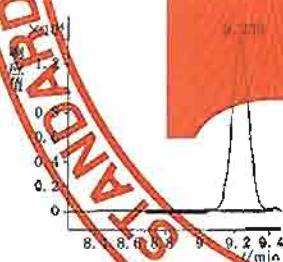


188. 甲咪唑胺
(ofurace)

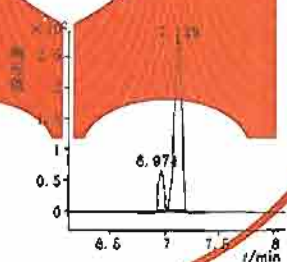


189. 噻唑硫磷
(fosfiazate)

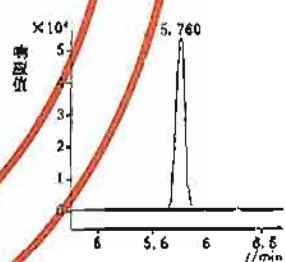


190. 甲基咪草酯
(imazamehabenz-methyl)

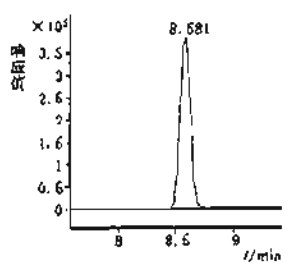


191. 乙拌磷亚砷
(disulfoton-sulfoxide)

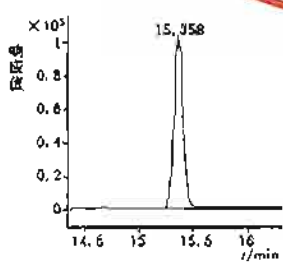


192. 稻瘟灵
(isoprothiolane)

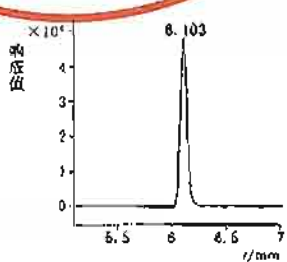


193. 抑得唑
(imazali)

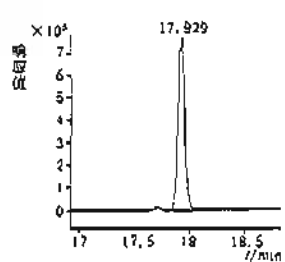


194. 辛硫磷
(phoxim)

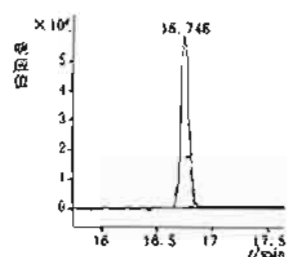


195. 喹硫磷
(quinalphos)

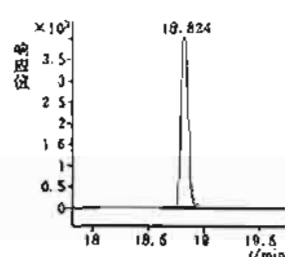


196. 苯氧威
(fenoxycarb)

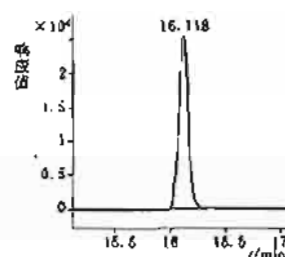


197. 嘧啶磷
(pyrimitate)

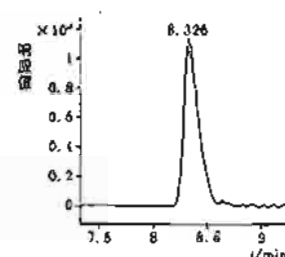


198. 丰索磷
(fensulfothin)

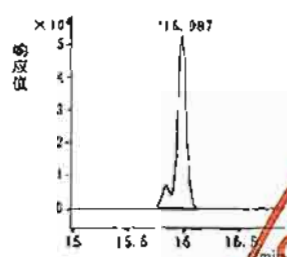


199. 氟咯草酮
(fluorochloridone)

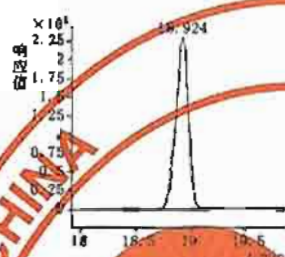


200. 丁草胺
(butachlor)

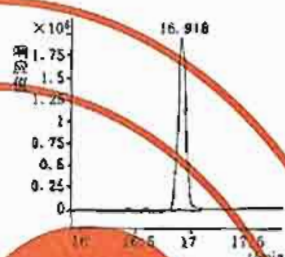


201. 苄嘧菌
(bensiximnathyl)

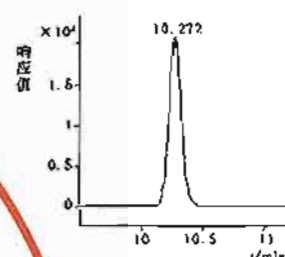


202. 戊叉菌唑
(triticonazole)

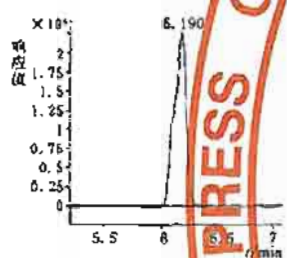


203. 苯线磷亚砷
(fenamiphos sulfoxide)

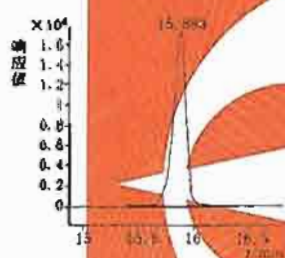


204. 噻吩草胺
(thiethylchlor)

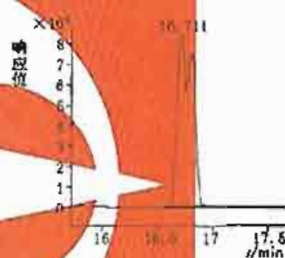


205. 氟菌胺
(fenoxanil)

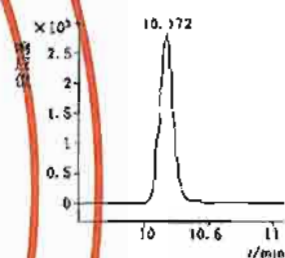


206. 氟啶草酮
(fluridone)

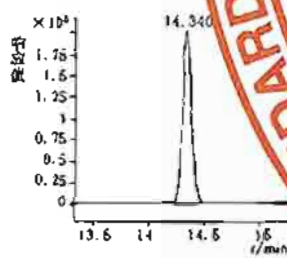


207. 叔环唑
(epoxiconazole)

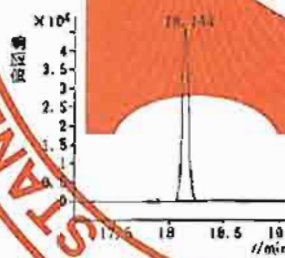


208. 氯辛硫磷
(chlorphoxim)

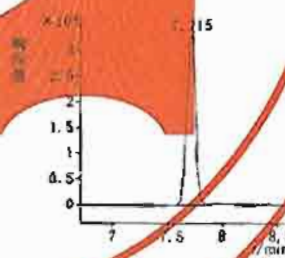


209. 苯线磷砷
(fenamiphos sulfone)

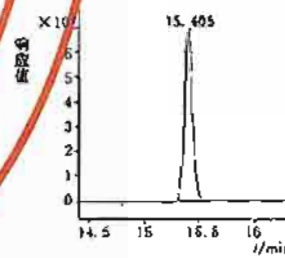


210. 腈苯唑
(fenbuconazole)

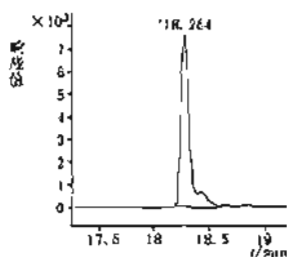


211. 异柳磷
(isofenphos)

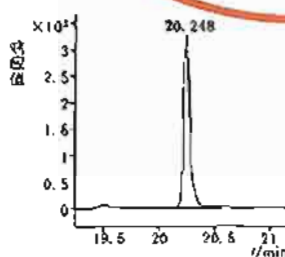


212. 苯醚菊酯
(phenothrin)

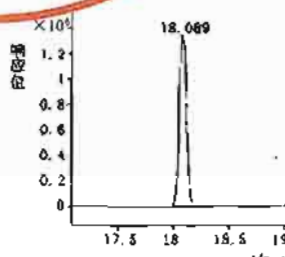


213. 呱草磷
(piperophos)

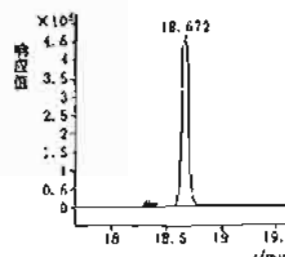


214. 增效醚
(piperonyl butoxide)

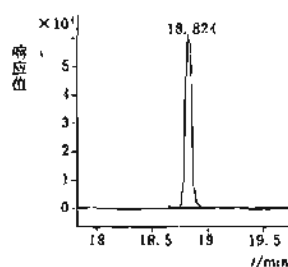


215. 乙氧氟草醚
(oxyfluorfen)

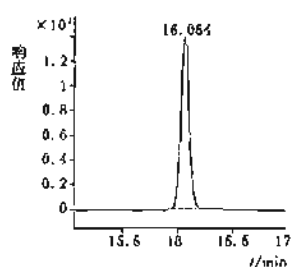


216. 氟噻草胺
(flufenacet)

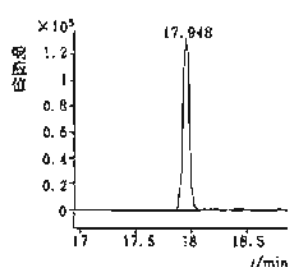


217. 伏杀硫磷
(phosalone)

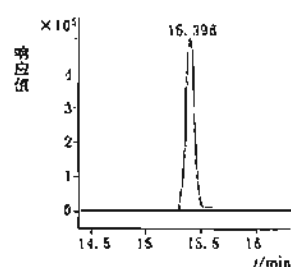


218. 甲氧虫酰肼
(methoxyfenozide)

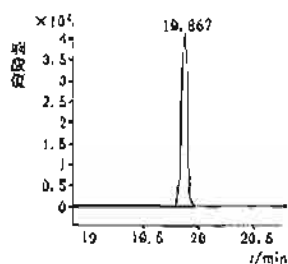


219. 丙硫特普
(aspon)

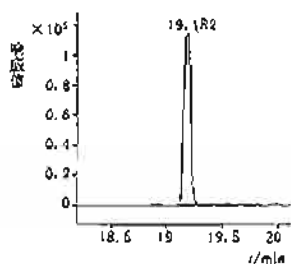


220. 乙硫磷
(ethion)

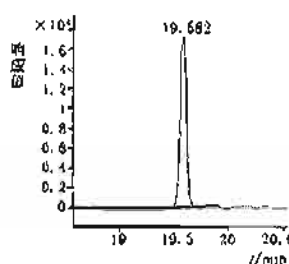


221. 丁醚腈
(diafenthiuron)

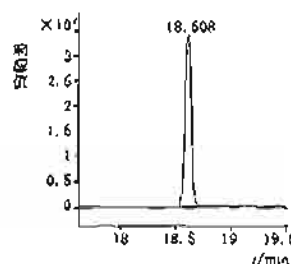


222. 双硫草定
(dithiopyr)

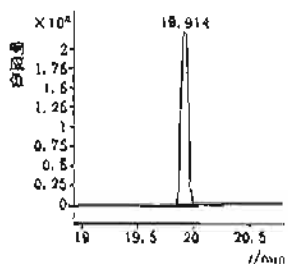


223. 螺螨酯
(spiroticlofen)

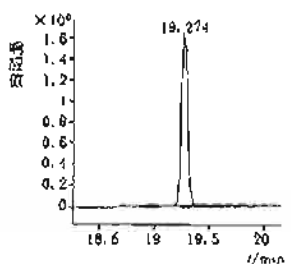


224. 噻螨酯
(fenpyroximate)

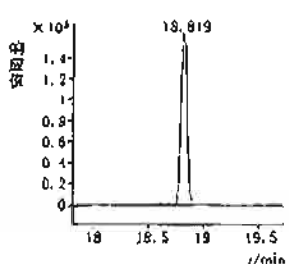


225. 胺氟草酯
(flumiclorac-pentyl)

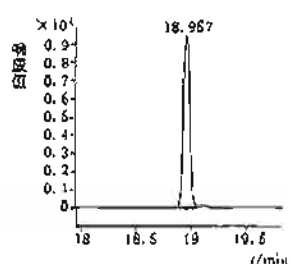

226. 双硫磷
(temephos)

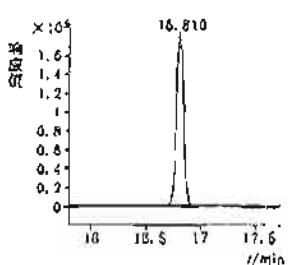


227. 氟丙啉草酯
(bute(ena)ri)

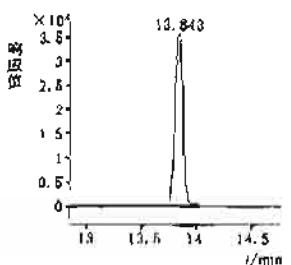


228. 多杀菌素
(spinosad)


D 组

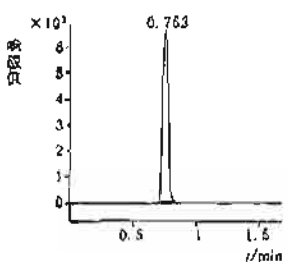


229. 甲呱金翁
(mepiquat chloride)

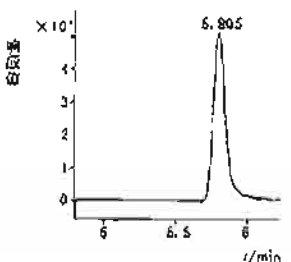


230. 二丙烯草胺
(allidochlor)

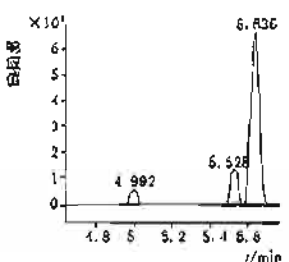


231. 三环唑
(tricyclazole)

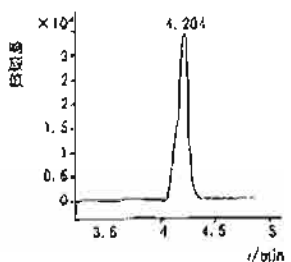


232. 苯噻草酮
(metamitron)

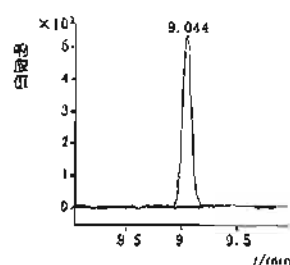


233. 异丙隆
(isoproturon)

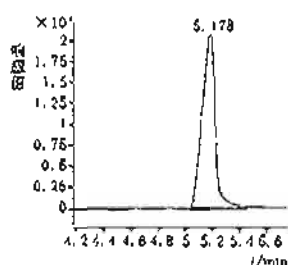


234. 莠去通
(atratone)

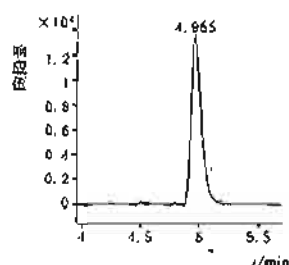


235. 敌草净
(oesmetryn)

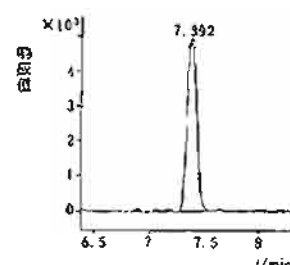


236. 赛克津
(metribuzin)

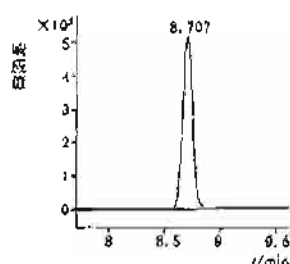


237. (DMST)

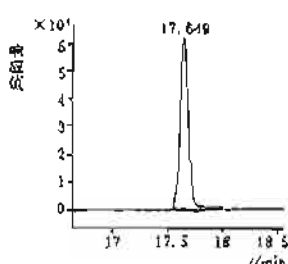


238. 环草敌
(cycloate)

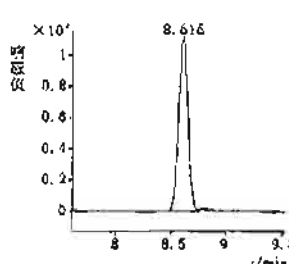


239. 莠去津
(atrazine)

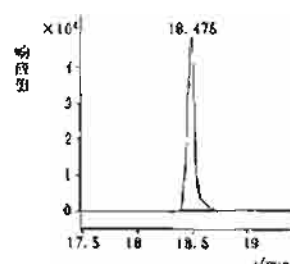


240. 丁草敌
(butylate)

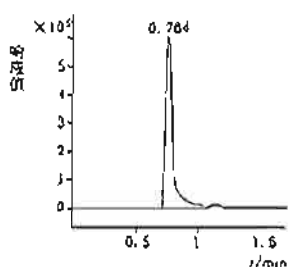


241. 吡蚜酮
(pymetrozin)

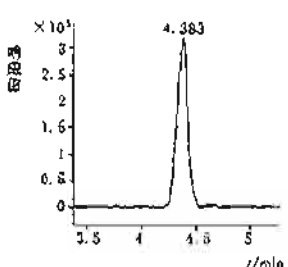


242. 氯草敏
(chloridazon)

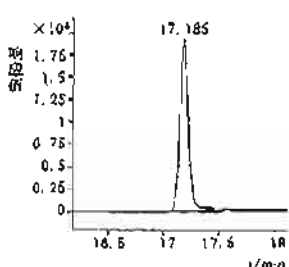


243. 莠草畏
(sulfallate)

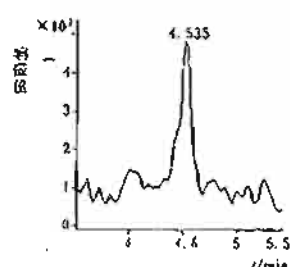


244. 乙氧苯胺
(ethiofencarb)

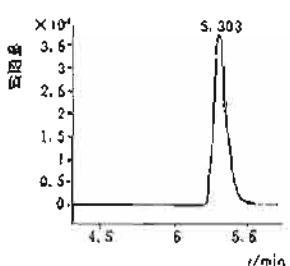


245. 特丁通
(terbumeton)

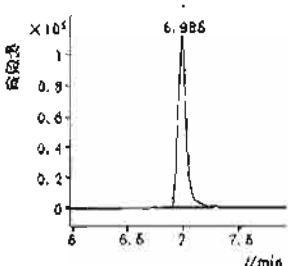


246. 环丙津
(cyprazine)

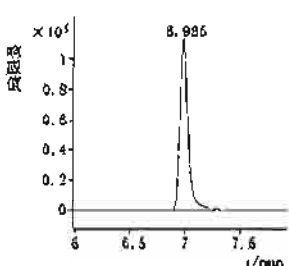


247. 阔草净
(ametryn)

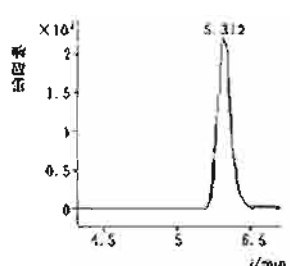


248. 木草隆
(iebuthiuron)

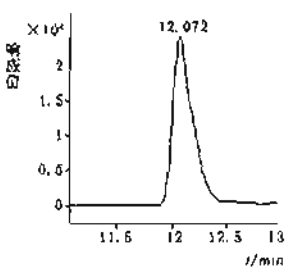


249. 草达津
(tricarazine)

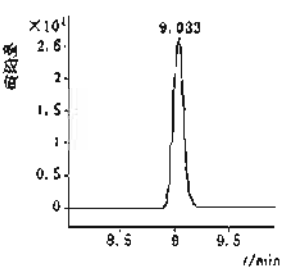


250. 另丁津
(sebutylazine)

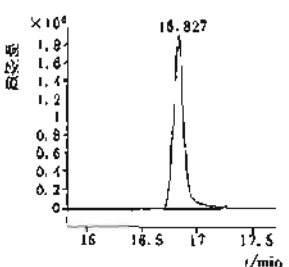


251. 畜虫避
(dibutyl succinate)

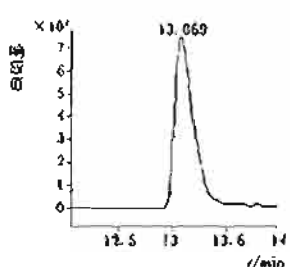


252. 牧草胺
(iebutam)

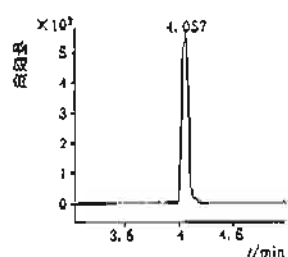


253. 久效威亚砷
(thiofanox-sulfoxide)

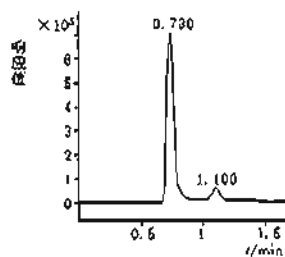


254. 杀螟丹
(caripap hydrochloride)

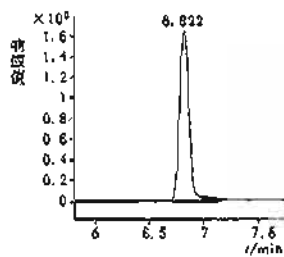


255. 虫螨畏
(methacrifos)

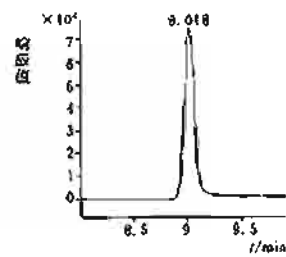


256. 虫线磷
(thionazin)

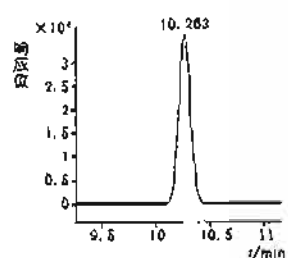


257. 利谷隆
(linuron(a))

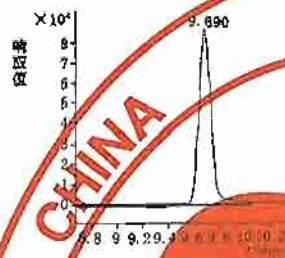


258. 庚虫磷
(heptanophos)

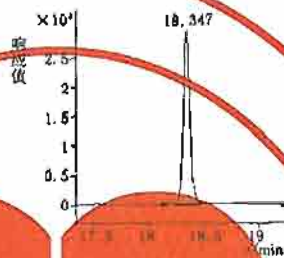


259. 苯草丹
(pinnu(ficarb))

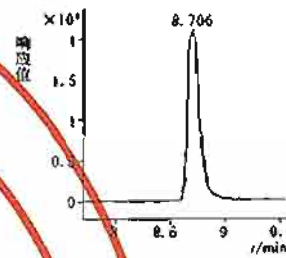


260. 杀草净
(diptopetryn)

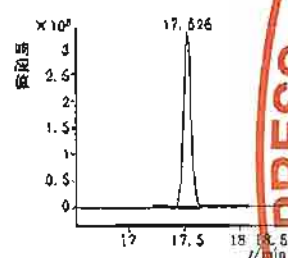


261. 禾草丹
(thiobencarb)

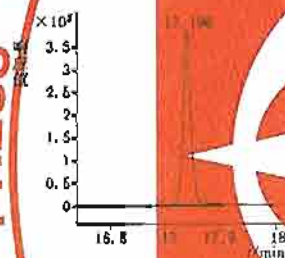


262. 三异丁基磷酸酯
(tri-iso-butyl phosphate)

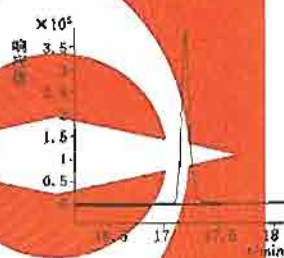


263. 三正丁基磷酸酯
(tri-n-butyl phosphate)

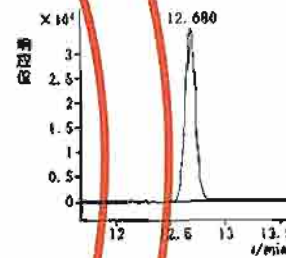


264. 乙萘威
(diethofencarb)

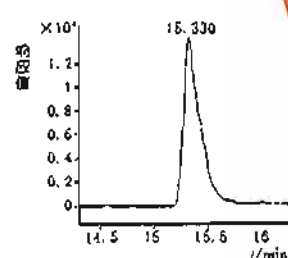


265. 硫线磷
(cadusafos)

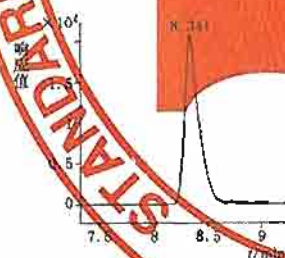


266. 吡唑草胺
(metazachlor)

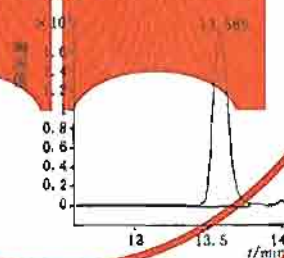


267. 胺丙畏
(propetamphos)

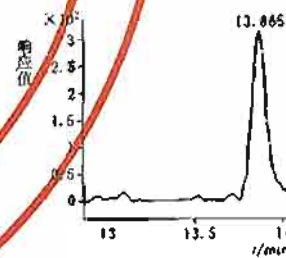


268. 特丁硫磷
(terbufos)

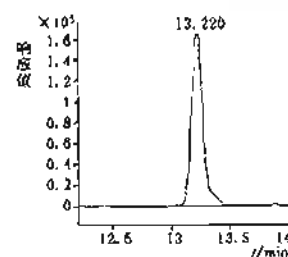


269. 硅氟唑
(simeconazole)

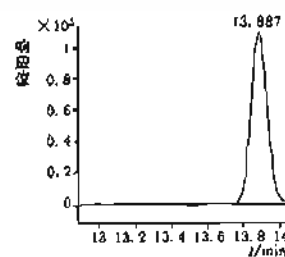


270. 三唑酮
(triadimefon)

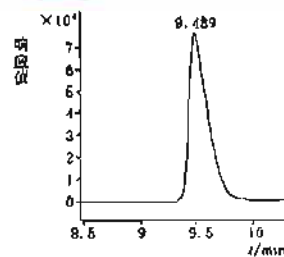


271. 甲拌磷砷
(phorate sulfone)

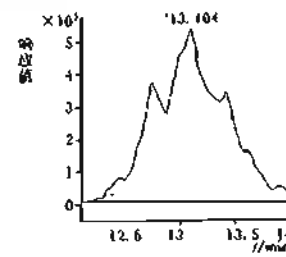


272. 十三吗琳
(tridemorph)

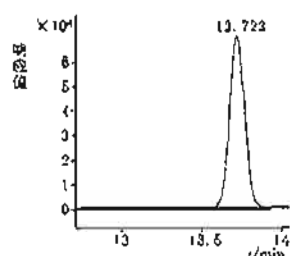


273. 苯噻酰草胺
(mefenacet)

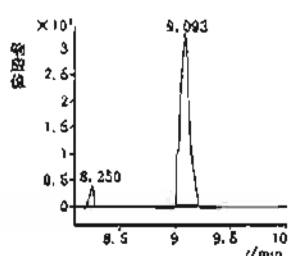


274. 苯线磷
(fenamiphos)

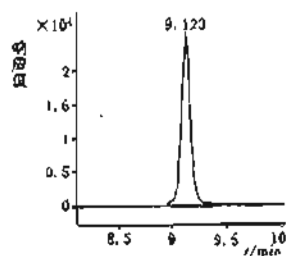


275. 丁苯吗啉
(fenpropimorph(c))

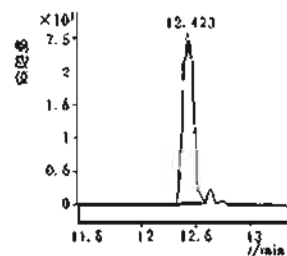


276. 戊唑醇
(tebuconazole)

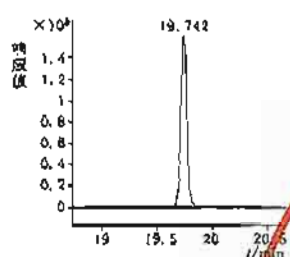


277. 异丙乐灵
(isopropalin)

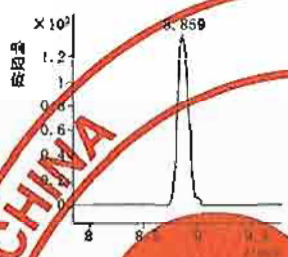


278. 单苯嘧啶醇
(bupirimidol)

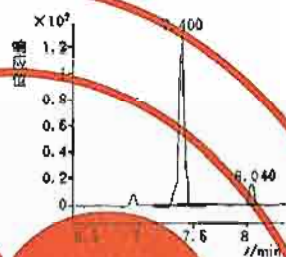


279. 乙嘧酚酯酸酯
(bupirimate)

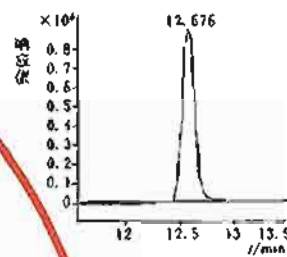


280. 保棉磷
(zinphos-methyl)

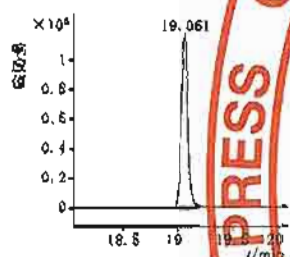


281. 丁噻吡磷
(tebupirimfos)

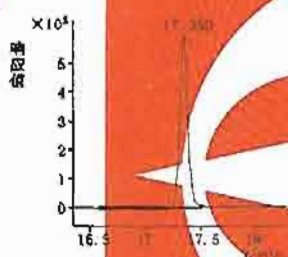


282. 稻丰散
(phenthoxate)

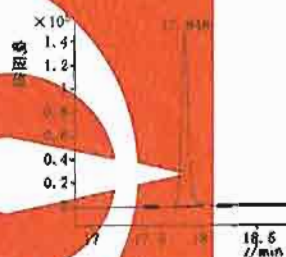


283. 治螟磷
(sulfolepi)

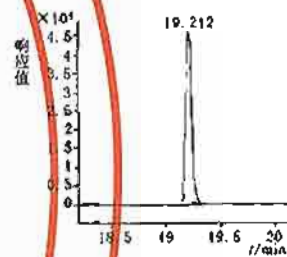


284. 硫丙磷
(sulprolos)

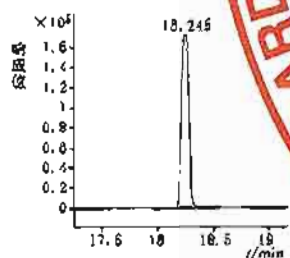


285. 苯硫磷
(EPN)

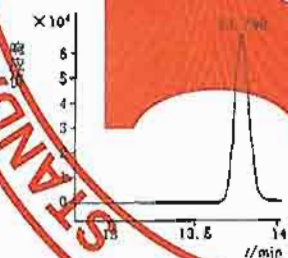


286. 烯唑醇
(diniconazole)

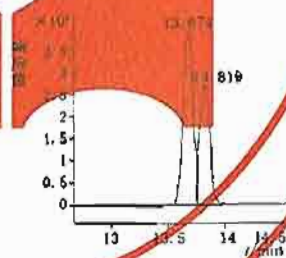


287. 稀禾啉
(sethoxydim)

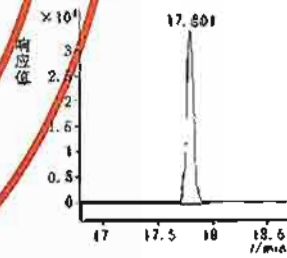


288. 纹枯藤
(pencycuron)

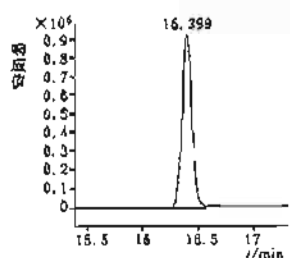


289. 灭蚜磷
(mecarbam)

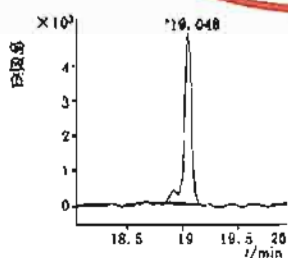


290. 苯草酮
(tralkoxydim)

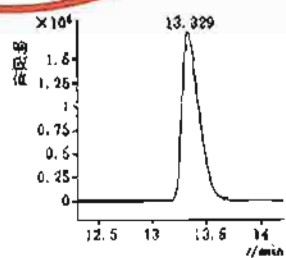


291. 马拉硫磷
(malathion)

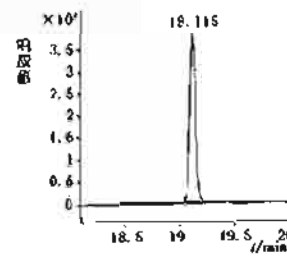


292. 烯草酮
(pyributicarb)

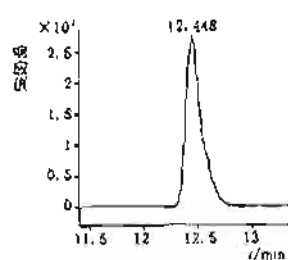


293. 吡啶硫磷
(pyridaphenthion)

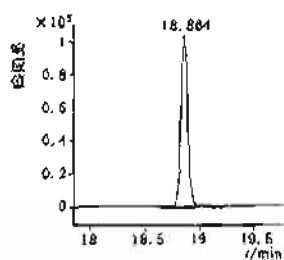


294. 噻啉磷
(pirimiphos-ethyl)

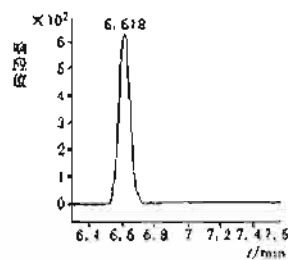


295. 硫双威
(thiodicarb)

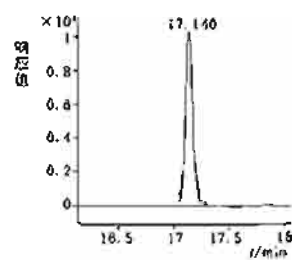


296. 吡唑硫磷
(pyraclofos)

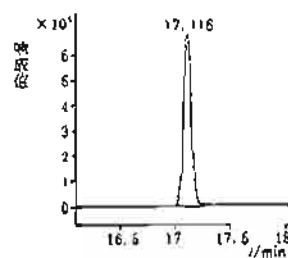


297. 吡氧酯菌
(picoxystrobin)

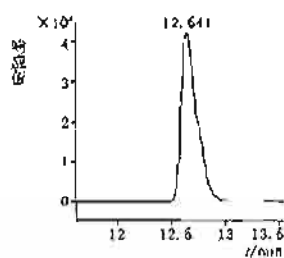


298. 四氟唑唑
(tetraconazole)

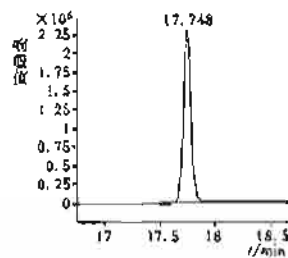


299. 吡唑解草酯
(mefenpyr-diethyl)

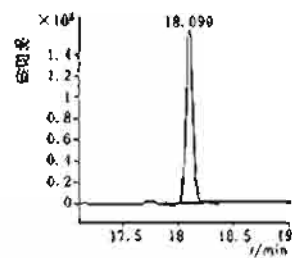


300. 丙溴磷
(profenfos)

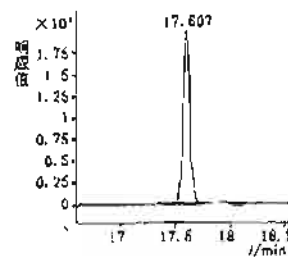


301. 百克敏
(pyraclostrobin)

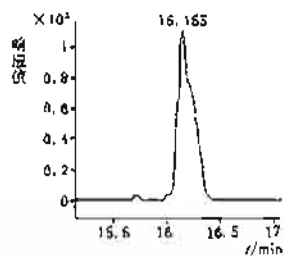


302. 烯酰吗啉
(dimethomorph)

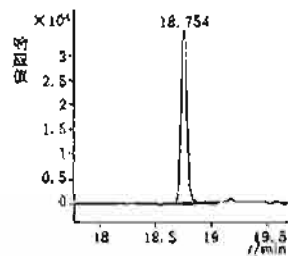

303. 噻啉菊酯
(kadethrin)

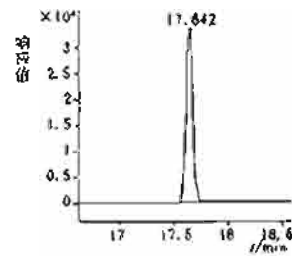


304. 噻唑烟酸
(thiazopyr)

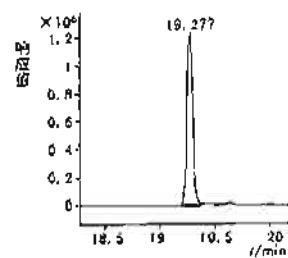


305. 氟啶脲
(chlorfluazuron)


E 组

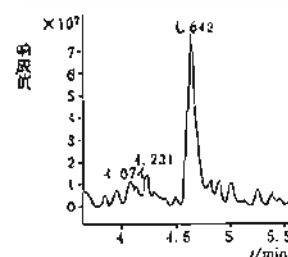


306. 4-氨基吡啶
(4-aminopyridine)

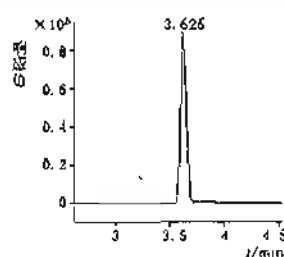


307. 灭多威
(methomyl)

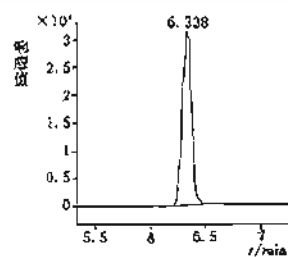


308. 咯嗪酮
(pyroquilon)

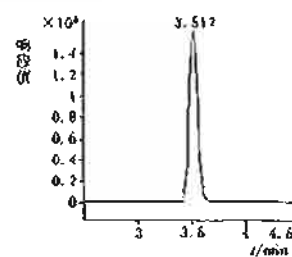


309. 麦穗灵
(fuberidazole)

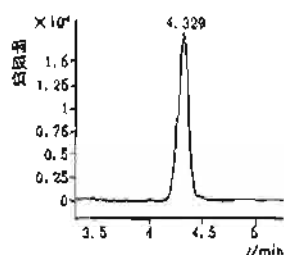


310. 丁脲酰胺
(isocarbamid)

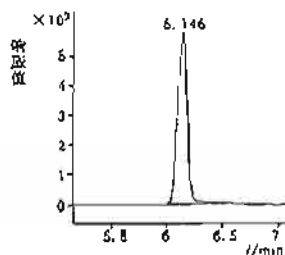


311. 丁腈威
(butocarboxim)

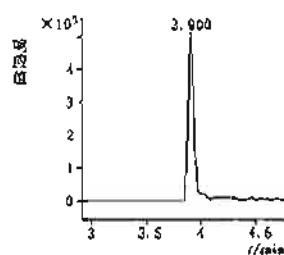


312. 杀虫脒
(chlordimeform)

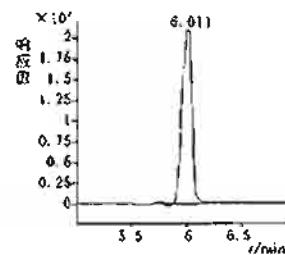


313. 烯腈氮
(cymoxanil)

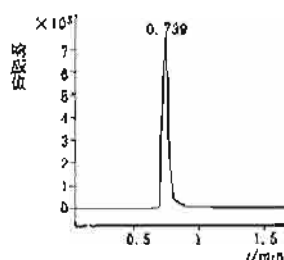


314. 氯硫酰草胺
(chlorthiamid)

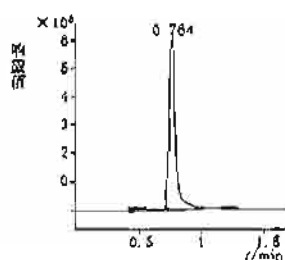


315. 灭害威
(aminocarb)

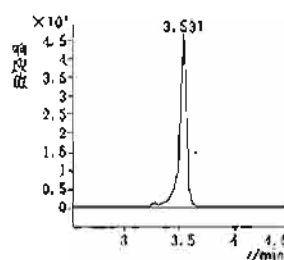


316. 氧乐果
(omehoate)

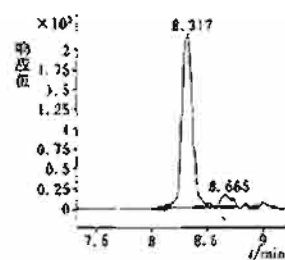


317. 乙氧嘧啶
(ethoxyquin)

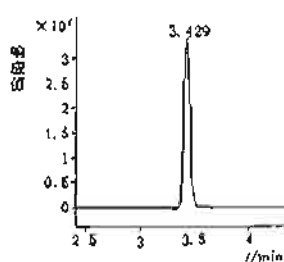


318. 涕灭威砒
(aldicarb sulfone)

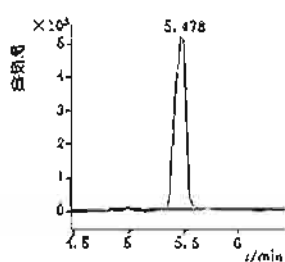


319. 二氯威
(dioxacarb)

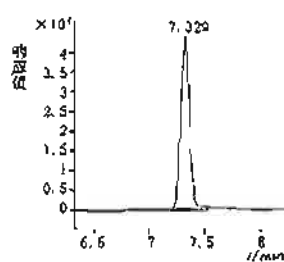


320. 甲基内吸磷
(dometon-s-methyl)

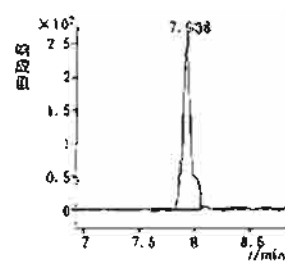


321. 杀虫酯
(cyanohos)

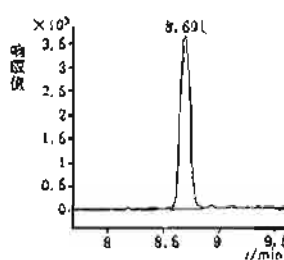


322. 甲基乙拌磷
(thiomeron)

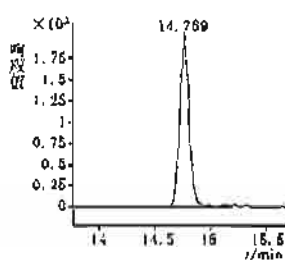


323. 灭菊丹
(folpet)

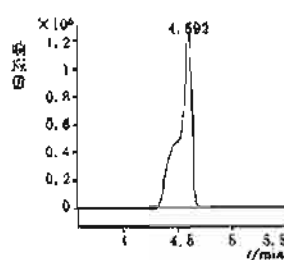


324. 甲基内吸磷砒
(demeton-s-methyl sulfone)

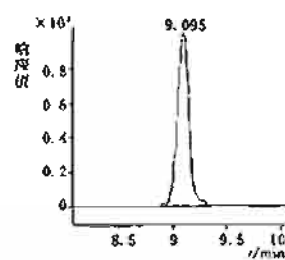


325. 苯丙定
(fenpropidin)

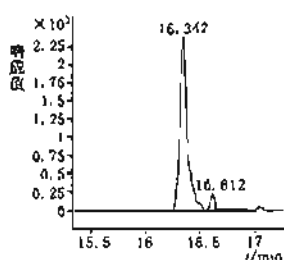


326. 赛硫磷
(amidithion)

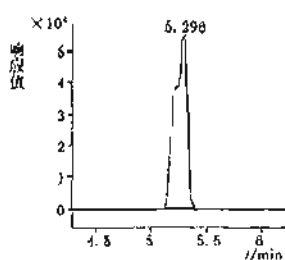


327. 甲咪唑烟酸
(imazapic)

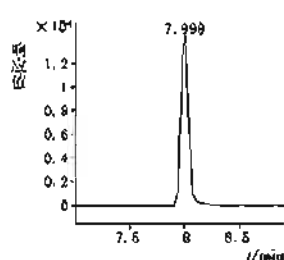


328. 对氧磷
(paraoxon-ethyl)

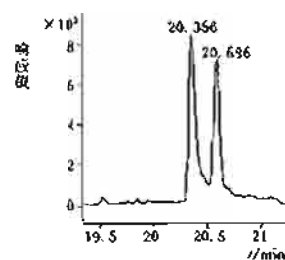


329. 4-十二烷基-2,6-二甲基吗啉
(aldirph)

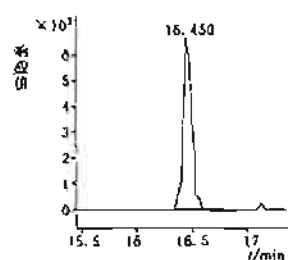


330. 乙烯菌核利
(vinclozolin)

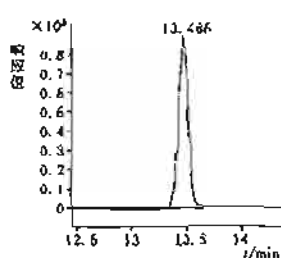


331. 烯效唑
(uniconazole)

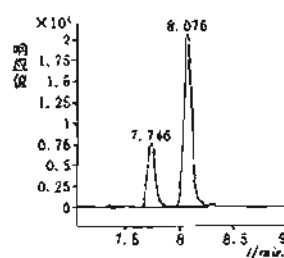


332. 啉啉肟
(pyrifenoxy)

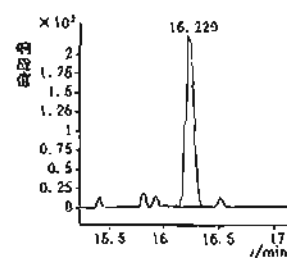


333. 氯硫磷
(chlorfenvinphos)

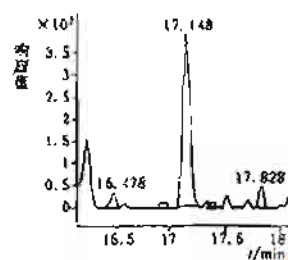


334. 异氯磷
(dicapthion)

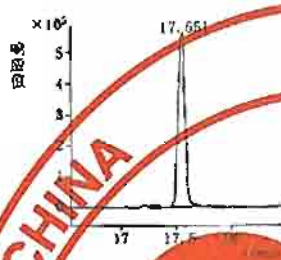


335. 噁嗪啉
(clofentoxin)

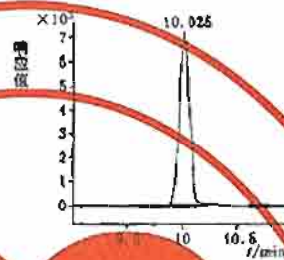


336. 氟草啶
(diflufenican)

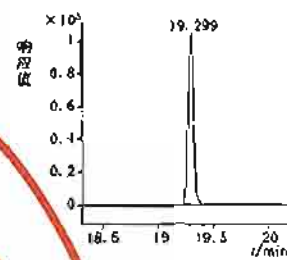


337. 野麦畏
(trifluralin)

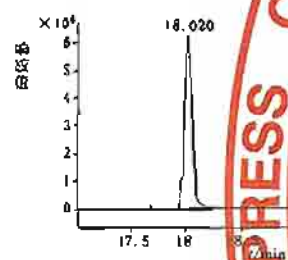


338. 苯氧喹啉
(quinoxifen)

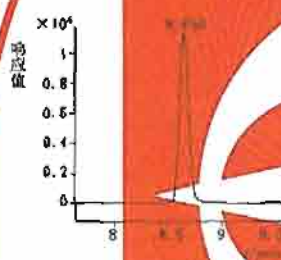


339. 硫磷唑啉
(fenthion sulfone)

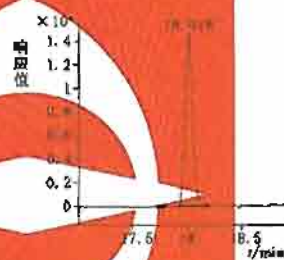


340. 氟啶草酮
(flurochloridone)

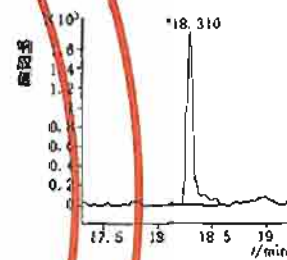


341. 酞酸苯甲基丁酯
(phthalic acid, benzyl butyl ester)

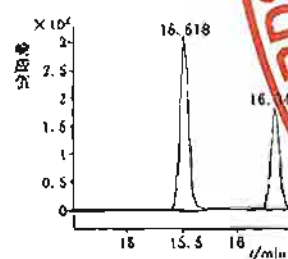


342. 氯唑磷
(isazofos)

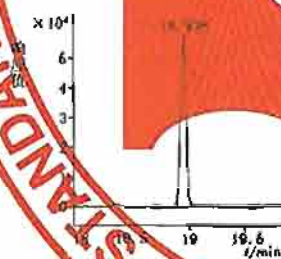


343. 除线磷
(dichlofenthion)

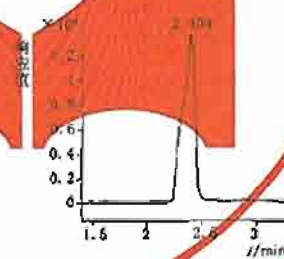


344. 蚜灭多啉
(varidothion sulfone)

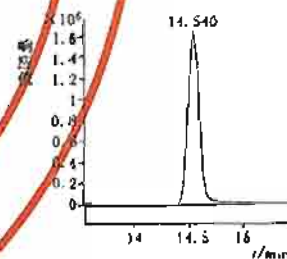


345. 特丁硫磷啉
(terbufos sulfone)

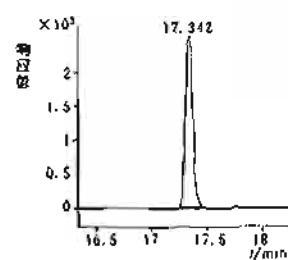


346. 敌乐胺
(dinitramine)

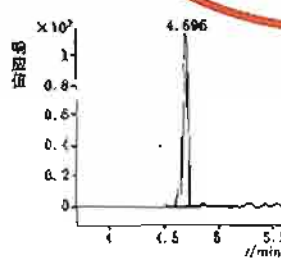


347. 噻嗪唑啉
(cyazofamid)

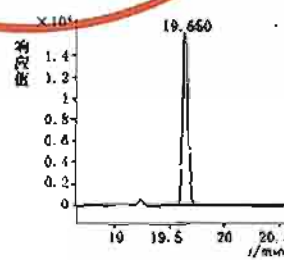


348. 毒虫啉
(trichlorfon)

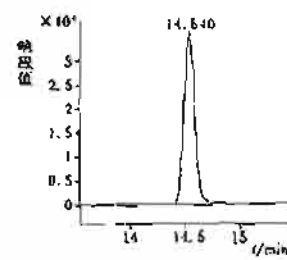


349. 吡啶菊酯-2
(resmethrin-2)

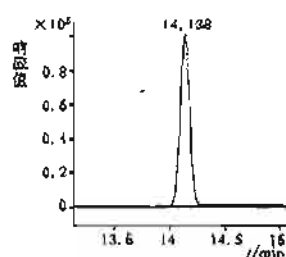


350. 啉酰菌胺
(boscalid)

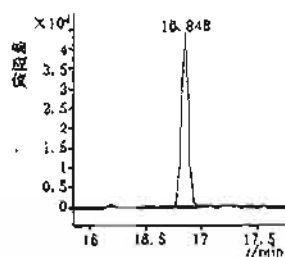


351. 甲磺乐灵
(nitralin)

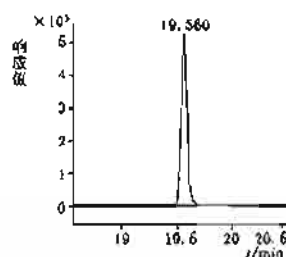


352. 甲氧菊酯
(fenpropathrin)

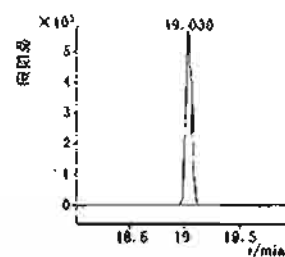


353. 噻螨酮
(hexythiazox)

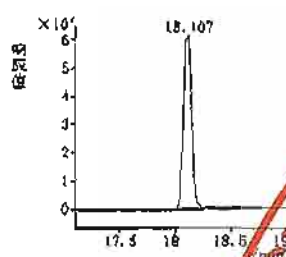


354. 苯氧特
(benzoximate)

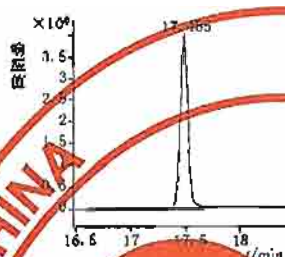


355. 新燕灵
(benzylprop-ethyl)

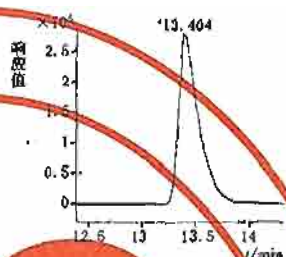


356. 噻螨醚
(pyrimidifen)

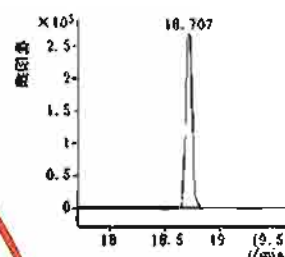


357. 呋线威
(furathiocarb)

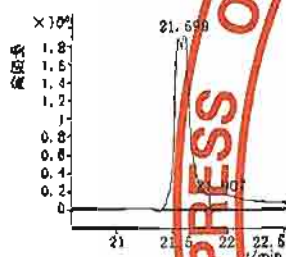


358. 反式氯菊酯
(trans-permethrin)

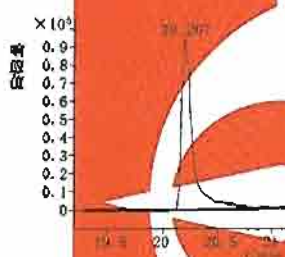


359. 醚菊酯
(etaleproax)

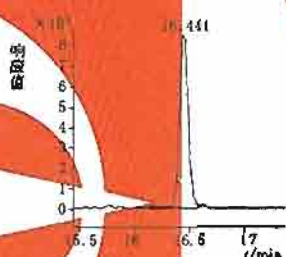


360. 苄草啞
(pyramixien)

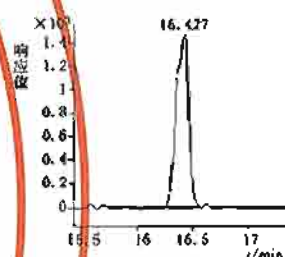


361. 噻唑啉
(flubenzimine)

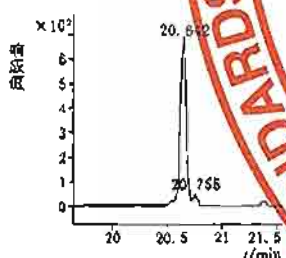


362. Z-氯氰菊酯
(zeta-cypermethrin)

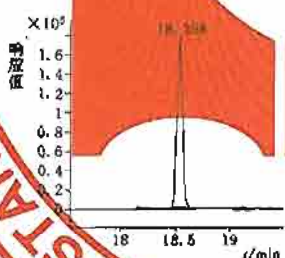


363. 氟吡乙禾灵
(haloxyfop-2-ethoxyethyl)

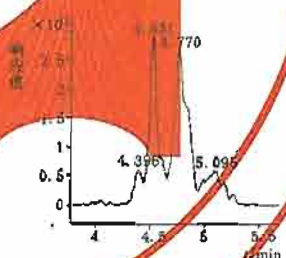

364. S-氯戊菊酯
(esfenvalerate)

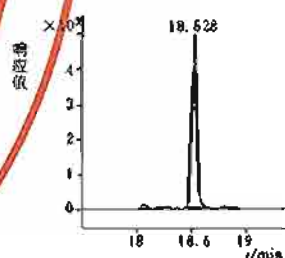


365. 乙羧氟草醚
(fluroglycofen-ethyl)

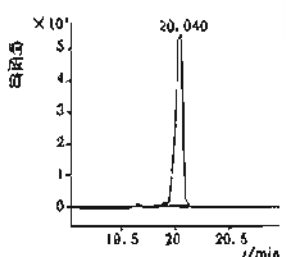


366. 氟胺氟菊酯
(tau-fluvalinate)


F 组

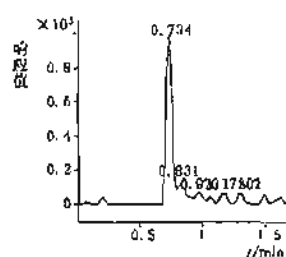


367. 丙烯酰胺
(acrylamide)

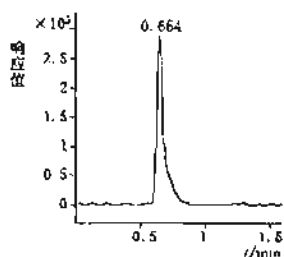


368. 叔丁基胺
(tert-Butylamine)

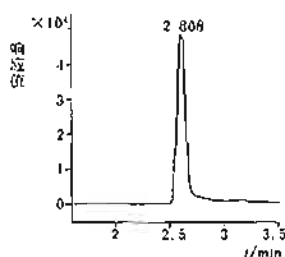


369. 噻苄唑
(hymexazol)

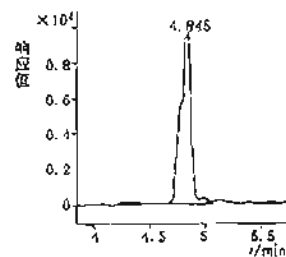


370. 邻苯二甲酰亚胺
(phthalimide)

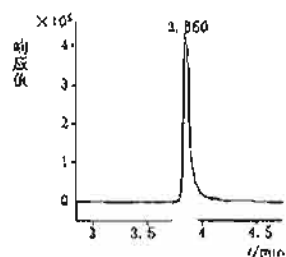


371. 甲氧磷
(dimefox)

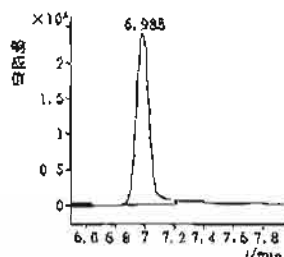


372. 速灭威
(metolcarb)

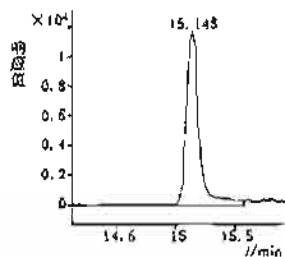


373. 二苯胺
(diphenylamin)

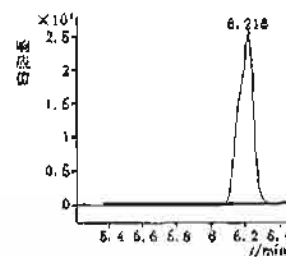


374. 1-萘基乙酰胺
(1-naphthyl acetamide)

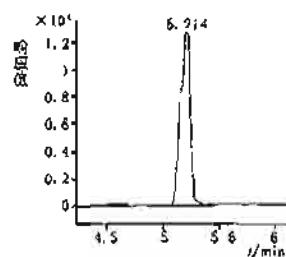


375. 脱乙基莠去津
(atrazine-desethyl)

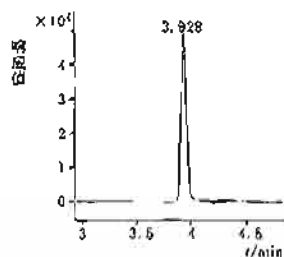


376. 2,6-二氯苯甲酰胺
(2,6-dichlorobenzamide)

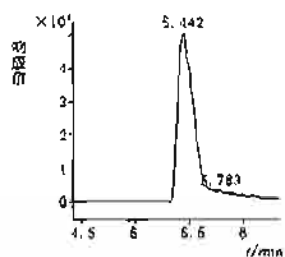


377. 涕灭威
(aldicarb)

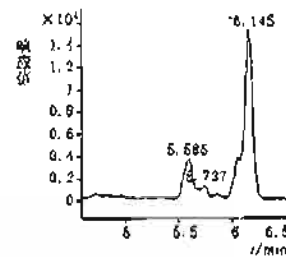


378. 邻苯二甲酸二甲酯
(dimethyl phthalate)

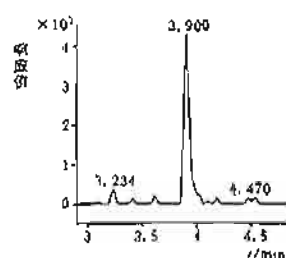


379. 杀虫脒盐酸盐
(chlordimeform hydrochloride)

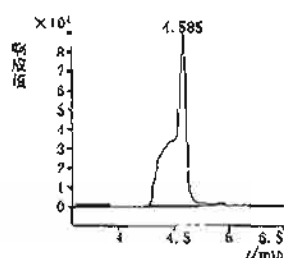


380. 西玛通
(simeton)

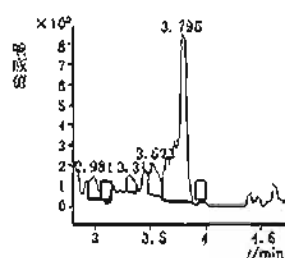


381. 呋草胺
(dinorefuran)

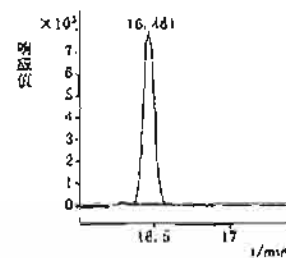


382. 克草敌
(pebulate)

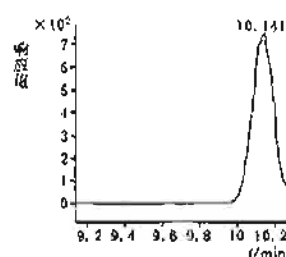


383. 活化酯
(acibenzolar-methyl)

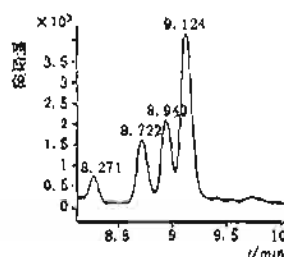


384. 蔬果磷
(dioxabenzofos)

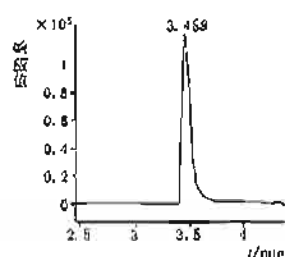


385. 杀线威
(oxamyl)

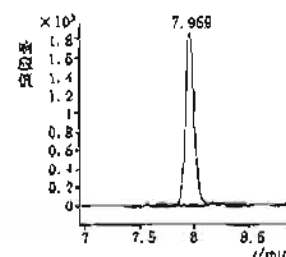


386. 甲基苯噻隆
(methabenzthiazuron)

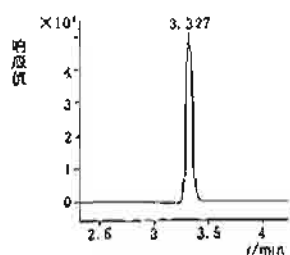


387. 丁酉砒威
(butoxycarboxim)

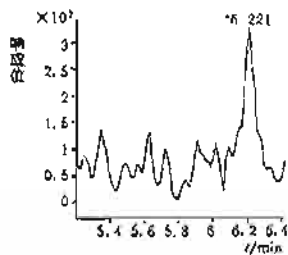


388. 自克威
(mexacarbate)

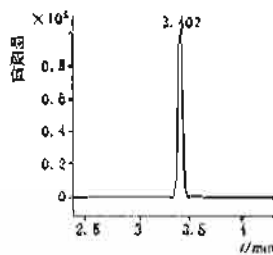


389. 甲基内吸磷亚砷
(demeton-s-methyl sulfoxide)

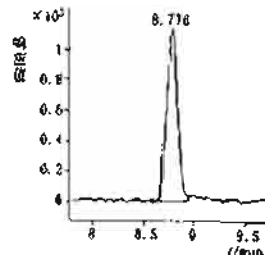


390. 久效威砷
(thiofanox sulfone)

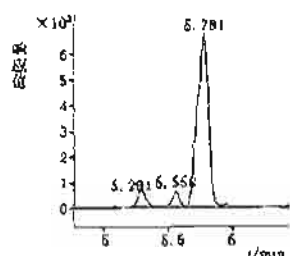


391. 磷环磷
(phosfolan)

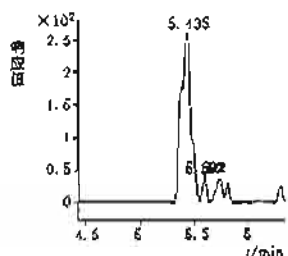


392. 磷赶内吸磷
(demeton-s)

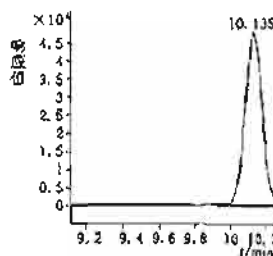


393. 氯倍硫磷
(fenthion oxon)

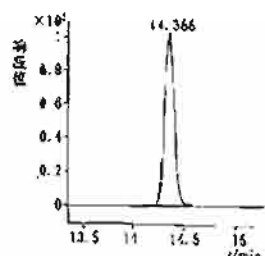


394. 蔡丙胺
(napropamide)

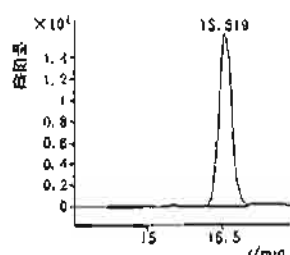


395. 杀螟硫磷
(fenitrothion)

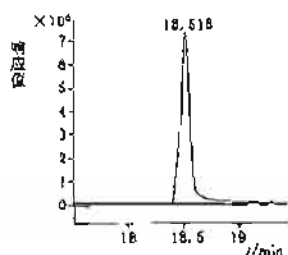


396. 酞酸二丁酯
(phthalic acid, dibutyl ester)

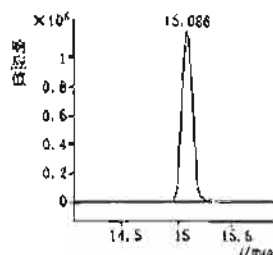


397. 丙草胺
(metolachlor)

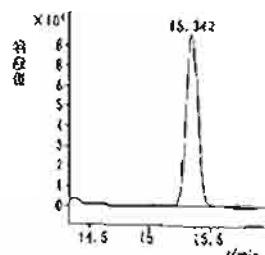


398. 噁嗪利
(procymidone)

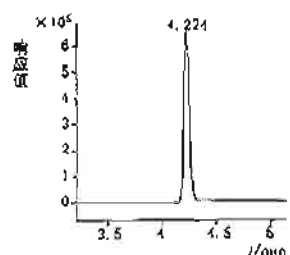


399. 蚜灭磷
(vamidothion)

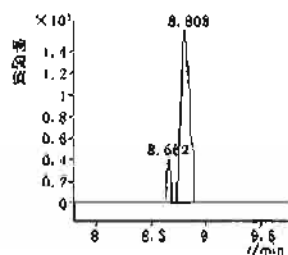


400. 枯草隆
(chloroxuron)

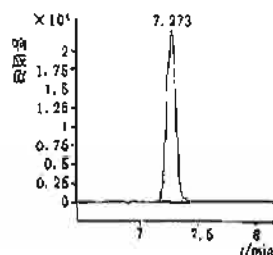


401. 威菌磷
(trisimphos)

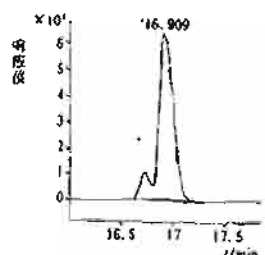


402. 右旋炔丙菊酯
(prallethrin)

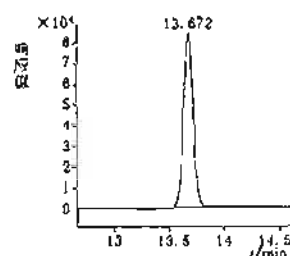


403. 可灭隆
(cumyluron)

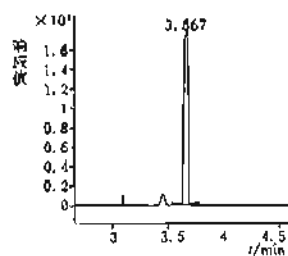


404. 甲氧咪草烟
(imazamox)

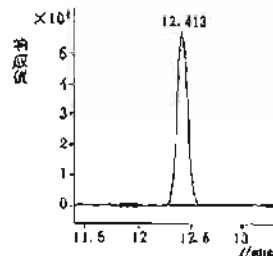


405. 杀鼠灵
(warfarin)

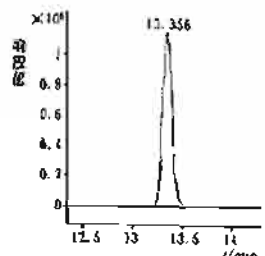


406. 亚胺硫磷
(phosmei)

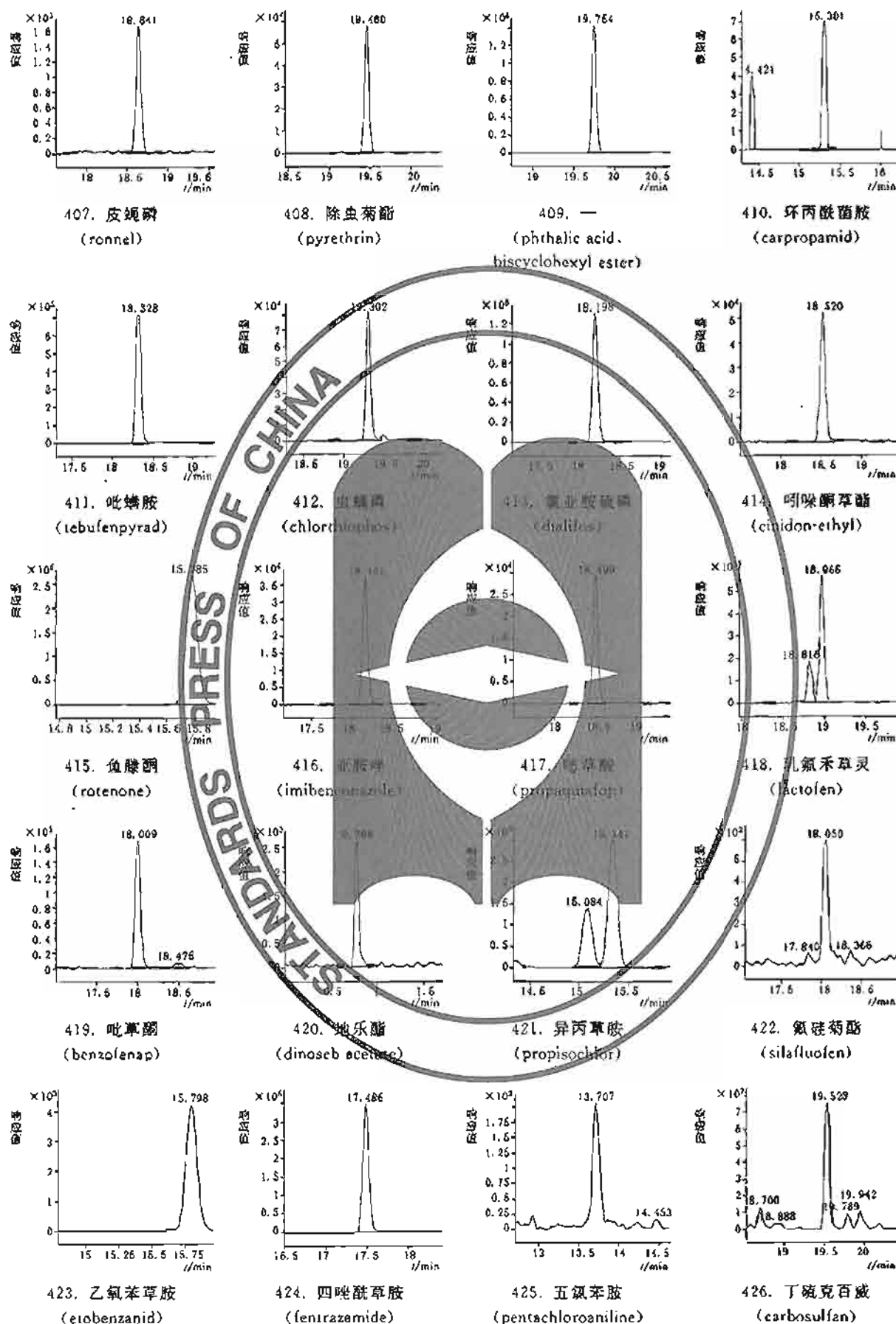


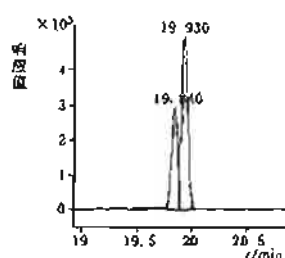


427. 苯噻氟菊酯
(cyphenothrin)

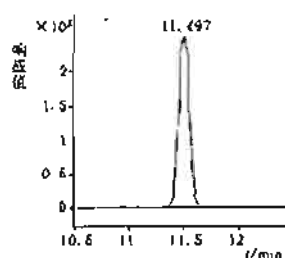


428. 啶虫脒
(dimethuron)

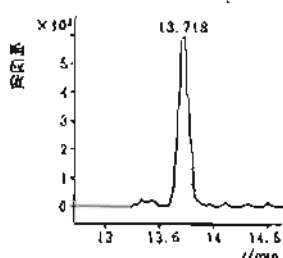


429. 马拉氧磷
(malathion)

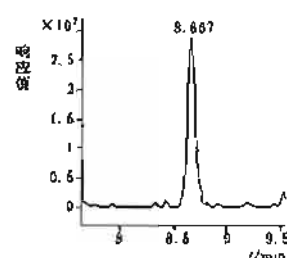


430. 氯杀螨酮
(chlorbenside sulfone)

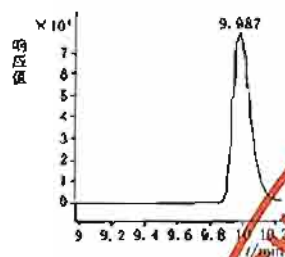


431. 多果定
(dodine)

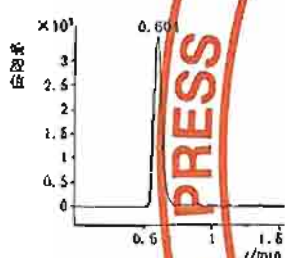


432. 芽草枯
(dalapon)

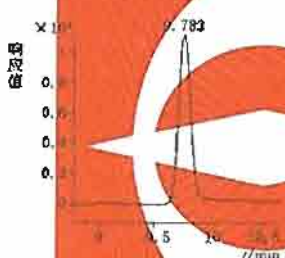


433. 2-苯基苯酚
(2-phenylphenol)

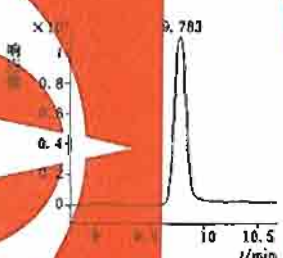


434. 2-苯基苯酚
(2-phenylphenol)

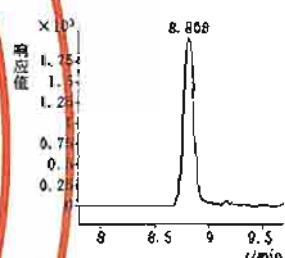


435. 氯硝胺
(dicloran)

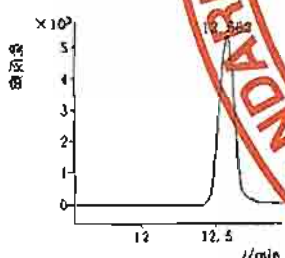


436. 氯苯胺灵
(chlorpropham)

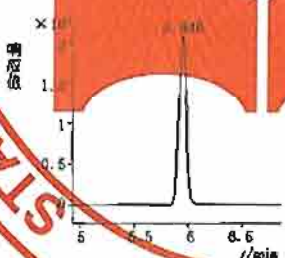


437. 特草定
(terbacil)

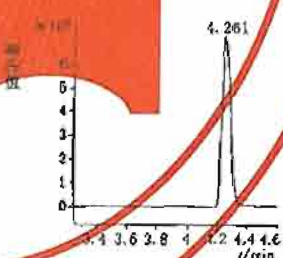


438. 2,4-滴
(2,4-D)

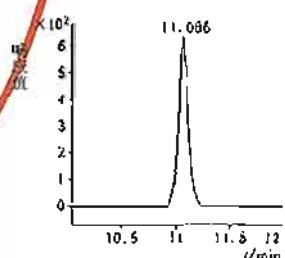


439. 咯菌腈
(fludioxonil)

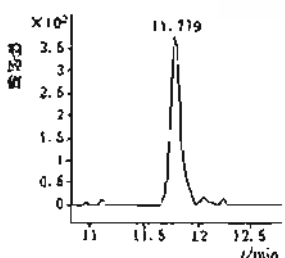


440. 杀螨醇
(chlorfenethol)

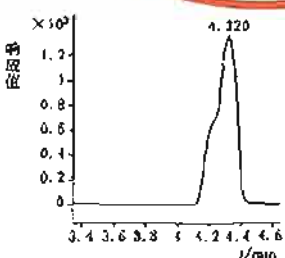


441. 萘草胺
(naptalam)

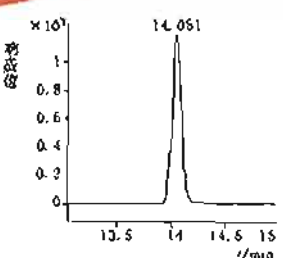


442. 灭幼脲
(chlorobenzuron)

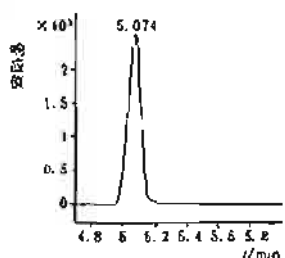


443. 氯霉素
(chloramphenicol)

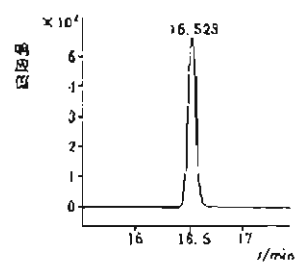


444. 噻唑菌酯
(famoxadone)

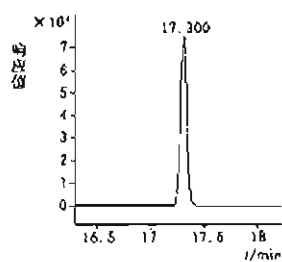


445. 吡氟酰草胺
(diflufenican)

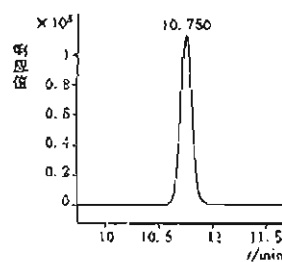

446. 氟氯唑
(cthiprole)

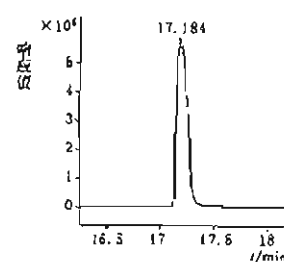

447. 氟啶胺
(fluazinam)

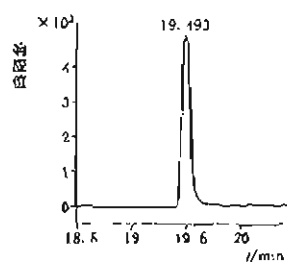

448. 克来范
(kelevan)

附 录 D
(资料性附录)

448 种农药及相关化学品精密度数据表

448 种农药及相关化学品精密度数据表见表 D.1。

表 D.1 448 种农药及相关化学品精密度数据表

序号	名 称	含量/ ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	重现性限 r	再现性限 R	含量/ ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	重现性限 r	再现性限 R
A 组							
1	苯胺灵	110.00	12.37	23.11	440.00	90.12	105.88
2	异丙威	2.30	0.80	0.69	9.20	3.46	3.74
3	3,4,5-混杀威	0.34	0.10	0.07	1.38	1.02	1.71
4	环莠隆	0.21	0.02	0.04	0.82	0.22	0.28
5	甲萘威	10.32	1.23	1.40	41.28	46.25	94.60
6	毒草胺	0.27	0.04	0.07	1.10	0.26	0.33
7	吡咪唑	1.33	0.20	0.11	5.33	1.21	2.28
8	西草净	0.14	0.04	0.06	0.54	0.16	0.21
9	绿谷隆	3.56	0.56	0.76	14.24	2.29	3.90
10	速灭磷	1.57	0.13	0.39	6.26	1.68	2.19
11	叠氮磷	1.38	0.23	0.33	5.53	3.90	3.37
12	密草通	0.07	0.03	0.03	0.29	0.08	0.08
13	啶菌胺	0.74	0.28	0.40	2.96	1.05	2.07
14	播土隆	8.96	0.68	1.26	35.84	12.86	17.82
15	双醚草胺	3.64	0.64	0.62	14.56	4.88	8.89
16	抗蚜威	0.15	0.04	0.05	0.61	0.18	0.47
17	异噻草松	0.42	0.15	0.21	1.69	0.33	0.59
18	氟草津	0.16	0.11	0.09	0.66	0.40	0.57
19	扑草净	0.16	0.04	0.06	0.65	0.14	0.22
20	甲基对氧磷	0.76	0.16	0.32	3.05	1.21	2.19
21	4,4'-二氯二苯甲酮	13.60	5.18	7.21	54.40	83.69	72.42
22	噻虫啉	0.37	0.14	0.11	1.48	0.47	0.84
23	吡虫啉	22.00	2.77	4.66	88.00	31.01	38.27
24	啶噻隆	1.50	0.17	0.34	6.00	2.83	4.75
25	丁噻草酮	1.07	0.36	0.24	4.26	0.85	1.31
26	燕麦敌	89.20	15.45	20.12	356.80	60.13	109.12
27	乙草胺	47.40	18.41	37.29	189.60	30.04	56.57
28	烯啶虫胺	17.12	3.96	23.56	68.48	33.35	73.78

表 D.1 (续)

序号	名 称	含量/ ($\mu\text{g/kg}$)	重现性限 r	再现性限 R	含量/ ($\mu\text{g/kg}$)	重现性限 r	再现性限 R
29	盖草津	0.24	0.08	0.09	0.97	0.16	0.25
30	二甲酚草胺	4.30	1.22	1.28	17.20	3.13	5.59
31	特草灵	2.10	0.15	0.14	8.40	1.81	3.87
32	戊菌唑	2.00	0.30	0.21	8.00	4.69	5.79
33	腈菌唑	1.00	0.20	0.13	3.98	1.40	1.87
34	咪唑乙烟酸	1.13	0.04	0.02	4.50	0.14	0.26
35	多效唑	0.57	0.07	0.11	2.30	0.73	1.17
36	倍硫磷亚矾	0.09	0.09	0.12	1.25	1.99	1.94
37	三唑醇	2.55	2.59	2.18	42.21	16.00	22.80
38	仲丁灵	1.90	0.30	0.35	7.60	1.45	1.46
39	螺喹落胺	0.05	0.02	0.02	0.21	0.10	0.13
40	甲基立枯磷	66.56	8.15	10.96	266.24	34.60	46.29
41	杀扑磷	10.66	1.34	2.48	42.64	8.01	13.78
42	烯丙菊酯	60.40	16.72	0.32	241.60	30.53	57.65
43	二嗪磷	0.71	0.12	0.10	2.85	0.50	0.50
44	敌瘟磷	0.75	0.27	0.38	3.01	0.27	0.38
45	丙草胺	0.33	0.05	0.07	1.34	0.23	0.73
46	氟硅唑	0.58	0.14	0.16	2.33	7.96	8.16
47	丙森唑	2.32	0.41	0.27	9.28	5.18	7.95
48	麦锈灵	3.48	0.41	0.82	13.42	5.32	7.71
49	氟酰胺	1.15	0.22	0.24	1.58	0.67	1.30
50	氮磺磷	3.60	1.46	1.73	14.40	2.75	5.95
51	苯腈灵	0.24	3.35	3.16	4.97	1.67	1.94
52	卡氯三唑醇	0.47	0.05	0.05	1.87	0.56	0.87
53	乙环唑	1.78	0.17	0.18	7.13	2.14	3.32
54	氯苯嘧啶醇	0.61	0.17	0.25	2.43	1.74	1.64
55	胺菊酯	1.82	0.18	0.51	7.28	2.68	2.73
56	抑菌灵	2.60	0.84	0.68	10.40	14.59	25.12
57	解草酯	1.86	0.39	0.16	7.54	2.29	8.32
58	联苯三唑醇	33.40	3.72	4.32	133.60	29.97	43.41
59	甲基毒死蜱	16.00	2.91	3.31	64.00	7.17	10.93
60	益棉磷	108.93	29.08	37.15	435.71	115.69	199.80
61	炔草酸	2.44	6.08	9.27	9.76	8.31	31.33
62	杀铃脲	3.92	1.20	1.01	15.68	2.48	3.71

表 D.1 (续)

序号	名 称	含量/ ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	重现性限 r	再现性限 R	含量/ ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	重现性限 r	再现性限 R
63	异噁氟草	3.90	0.94	1.28	15.60	5.23	11.57
64	莎稗磷	0.71	1.13	1.50	2.86	1.87	2.13
65	唑禾灵	0.68	0.23	0.20	2.73	0.46	1.10
66	精氟吡甲禾灵	2.64	0.48	0.50	10.56	1.62	2.69
67	精吡嘧草隆	0.26	0.07	0.11	1.05	0.25	0.18
68	乙基溴硫磷	567.69	141.52	106.68	2 270.76	552.43	673.65
69	地散磷	34.20	2.32	4.81	136.80	40.93	51.40
70	溴苯烯磷	6.02	0.37	0.59	12.08	2.73	7.08
71	啶菌酯	0.45	0.09	0.09	1.80	0.70	0.93
72	吡菌磷	1.62	0.61	0.78	6.50	1.74	4.58
73	氟虫腴	3.17	1.43	9.36	12.67	1.19	2.77
74	茚虫威	7.94	1.09	1.25	30.16	8.86	12.41
B 组							
75	乙拌硫磷	52.20	28.03	20.91	208.80	3.53	5.00
76	丁酰肼	2.60	6.43	1.09	10.40	7.11	8.08
77	棉隆	127.00	102.17	98.92	508.00	299.14	321.39
78	烟碱	2.20	0.41	0.77	8.80	6.60	6.56
79	非草隆	1.03	0.25	0.14	4.12	1.73	1.13
80	虱立克	1.56	0.05	0.13	6.23	1.65	1.64
81	禾草敌	2.10	1.27	1.90	8.40	2.77	4.12
82	多菌灵	0.17	0.17	0.26	1.87	1.57	1.90
83	6-氯-4-羟基-3-苯基哒嗪	1.65	0.45	0.53	6.62	19.18	21.05
84	残杀威	24.40	2.12	5.00	97.60	27.11	23.11
85	异噁隆	0.41	0.13	0.12	1.63	0.50	0.47
86	绿麦隆	0.62	0.05	0.16	2.50	1.20	0.86
87	久效威	157.00	53.65	61.96	628.00	103.95	119.38
88	氟草灵	183.00	158.52	139.06	732.00	391.05	301.52
89	噁虫威	3.18	1.22	1.44	12.72	6.98	6.16
90	扑灭津	0.32	0.22	0.38	1.28	0.66	0.83
91	持丁津	0.47	0.16	0.43	1.87	1.38	1.34
92	敌草隆	1.56	0.24	0.18	6.24	4.54	3.50
93	氟甲硫磷	448.00	101.37	83.19	1 792.00	103.86	115.55
94	萎锈灵	0.56	0.16	0.15	2.22	1.09	0.72
95	噻虫胺	63.00	10.18	6.43	252.00	82.53	57.18

表 D.1 (续)

序号	名 称	含量/ ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	重现性限 r	再现性限 R	含量/ ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	重现性限 r	再现性限 R
96	拿草特	15.38	5.16	15.13	61.52	20.59	32.40
97	二甲草胺	1.90	0.06	0.25	7.61	2.86	2.63
98	溴谷隆	16.84	3.41	4.55	67.36	31.38	28.96
99	甲拌磷	314.00	64.03	45.15	1 256.00	380.00	419.52
100	苯草醚	24.20	12.96	18.43	96.80	40.50	29.48
101	地安磷	2.32	0.20	0.56	9.28	3.63	2.53
102	脱米甲基亚胺唑	6.22	0.00	0.00	24.88	0.00	0.00
103	草不隆	7.10	0.84	1.85	28.40	19.54	15.45
104	精甲霜灵	1.54	0.23	0.73	6.15	21.17	21.35
105	发硫磷	2.46	0.17	0.40	9.84	1.42	0.80
106	乙氧呋草黄	372.00	1.28	1.76	1 488.00	26.35	20.04
107	异稻瘟净	8.28	0.82	2.43	33.12	4.42	1.57
108	特普	10.40	0.68	0.61	41.60	0.95	1.21
109	环丙唑醇	0.73	0.08	0.13	2.93	1.76	2.35
110	噻虫啉	33.00	8.88	13.87	132.00	68.64	43.46
111	育毒磷	0.52	0.93	1.02	2.07	1.29	0.90
112	乙嘧硫磷	18.76	17.73	11.90	75.04	8.23	14.95
113	杀鼠醚	1.35	0.45	1.57	5.41	6.46	5.46
114	赛灭磷	80.00	9.96	26.86	320.00	130.15	86.61
115	磷胺	3.88	0.29	0.65	15.52	5.11	4.54
116	甜菜宁	4.48	1.15	2.91	17.92	6.82	5.75
117	联苯并酯	22.80	2.04	0.77	91.20	101.42	85.54
118	环酰菌胺	0.95	0.05	0.05	3.78	0.17	0.12
119	粉唑醇	8.58	0.60	1.10	34.32	20.47	23.38
120	抑茵丙胺酯	0.77	0.09	0.14	3.08	1.14	1.08
121	生物丙烯菊酯	198.00	27.94	21.71	792.00	288.41	329.33
122	苯腈磷	20.80	2.21	2.70	83.20	29.58	28.49
123	甲基嘧啶磷	0.20	0.03	0.06	0.81	0.47	0.45
124	噻嗪酮	0.88	0.19	0.19	3.51	1.84	1.94
125	乙拌磷砒	2.46	0.21	0.76	9.84	5.39	4.69
126	啶螨醚	0.32	0.03	0.06	1.30	0.74	0.71
127	三唑磷	0.68	0.08	0.29	2.72	1.81	2.20
128	脱叶磷	1.61	0.20	0.27	6.46	5.00	4.52
129	环酯草醚	0.62	0.35	0.71	2.50	1.24	1.24

表 D.1 (续)

序号	名 称	含量/ ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	重现性限 r	再现性限 R	含量/ ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	重现性限 r	再现性限 R
130	叶菌唑	1.32	0.15	0.17	5.27	3.24	3.45
131	蚊蝇醚	0.43	0.06	0.11	1.72	1.01	1.05
132	异噁唑草胺	0.19	0.02	0.15	0.74	0.44	0.44
133	吡草酮	0.44	0.09	0.42	1.78	1.17	1.41
134	氟乐灵	167.40	59.80	52.45	334.80	28.99	15.08
135	甲基麦草灵异丙酯	20.20	1.98	2.82	80.80	52.70	54.77
136	生物吡啶菊酯	7.42	2.13	1.65	29.68	8.03	3.15
137	丙环唑	1.76	0.42	0.55	7.03	5.48	5.78
138	毒死蜱	53.80	7.02	11.85	215.20	68.93	67.03
139	氯乙氧灵	488.00	136.71	263.77	1 952.00	695.53	1 216.19
140	氯磺隆	2.74	1.10	1.04	10.96	0.00	0.00
141	麦草灵异丙酯	0.43	0.08	0.12	1.74	1.11	1.32
142	杀虫畏	2.22	0.37	0.24	8.88	4.57	4.40
143	吡蚜酮	68.60	16.13	19.22	274.40	126.13	84.64
144	噻菌唑	3.14	0.28	0.57	12.56	8.41	9.74
145	氟吡啶草胺	0.73	0.13	0.10	2.90	2.02	1.14
146	氟噻乙草酯	5.30	0.00	0.00	21.20	19.03	9.70
147	肟菌酯	2.00	0.39	0.35	8.00	4.29	4.18
148	氟铃脲	25.20	4.09	6.03	100.80	53.10	36.96
149	氟酰胺	8.04	2.04	2.70	32.16	20.77	11.32
150	flurazuron	26.80	1.56	3.80	107.20	42.60	40.09
C 组							
151	抑芽丹	80.00	33.00	32.39	320.00	66.02	560.76
152	甲胺磷	4.93	2.15	3.41	19.72	4.07	8.61
153	苗草敌	37.34	5.81	11.90	149.35	70.39	37.62
154	避蚊胺	0.55	0.07	0.08	2.20	0.20	0.22
155	灭草隆	34.74	3.08	3.15	138.94	8.83	14.22
156	噻霉胺	0.68	0.25	0.62	2.72	0.32	0.83
157	黑棉胺	0.78	0.22	0.22	3.12	0.19	0.84
158	灭藻醚	7.92	3.54	2.27	31.68	7.36	17.03
159	仲丁威	5.90	0.49	1.16	23.60	2.34	2.97
160	敌稗	21.59	21.63	14.25	86.36	9.37	18.65
161	克百威	13.06	0.73	2.31	52.24	6.86	11.59
162	噻虫咪	1.44	0.14	0.46	5.76	0.76	1.99

表 D.1 (续)

序号	名 称	含量/ ($\mu\text{g/kg}$)	重现性限 r	再现性限 R	含量/ ($\mu\text{g/kg}$)	重现性限 r	再现性限 R
163	噻菌胺	0.32	0.21	1.17	1.28	0.33	2.41
164	扑灭通	0.13	0.04	0.02	0.52	0.05	0.08
165	甲硫威	41.20	19.33	13.46	164.80	0.79	16.79
166	甲氧隆	0.64	0.21	0.13	2.55	0.42	0.59
167	乐果	7.60	1.18	2.28	30.40	3.12	2.05
168	伏草隆	0.92	0.25	0.28	3.68	0.67	2.06
169	百治磷	1.14	0.52	0.40	4.58	0.76	3.91
170	庚酰草胺	0.20	0.14	0.17	4.80	0.56	0.96
171	双苯酰草胺	0.14	0.10	0.13	0.57	0.07	0.11
172	灭线磷	2.76	23.60	24.10	11.06	1.77	1.13
173	地虫硫磷	7.46	2.50	3.43	29.83	5.17	16.30
174	土菌灵	100.42	25.13	20.32	401.68	86.83	68.02
175	环嗪酮	0.12	0.03	0.07	0.48	0.07	0.69
176	阔草净	0.11	0.10	0.16	0.44	0.14	0.12
177	敌百虫	1.12	0.35	0.44	1.49	1.33	1.27
178	内吸磷	6.72	3.27	4.09	27.08	0.73	1.69
179	解草酮	6.90	1.33	1.00	27.60	2.27	3.61
180	除草定	23.60	3.92	2.95	94.40	5.57	9.59
181	甲拌磷亚砷	368.28	153.37	938.47	1473.12	0.00	0.00
182	溴莠敏	3.60	1.06	0.91	14.40	4.09	2.57
183	氧化萎锈灵	0.90	0.23	0.28	3.58	0.34	4.49
184	灭锈胺	0.38	0.22	0.14	1.51	0.35	0.55
185	乙拌磷	469.70	210.44	230.38	1878.78	509.98	1335.04
186	倍硫磷	22.00	8.68	9.44	286.00	12.86	36.36
187	甲霜灵	0.50	0.10	0.09	2.00	0.32	0.38
188	甲呋酰胺	1.00	0.37	0.24	4.00	0.19	0.91
189	噻唑硫磷	0.56	0.01	0.10	2.24	0.73	1.69
190	甲基咪草酯	0.16	0.09	0.07	0.66	0.07	0.28
191	乙拌磷亚砷	2.84	0.80	0.90	11.38	8.80	30.24
192	稻瘟灵	1.85	0.19	0.18	7.39	1.26	1.02
193	抑霉唑	2.00	0.38	0.69	8.00	0.83	3.06
194	辛硫磷	82.80	6.60	7.81	331.20	14.90	26.58
195	唑硫磷	2.00	0.42	0.45	7.99	1.00	2.28
196	苯氧威	18.27	10.20	8.49	73.08	55.51	59.00

表 D.1 (续)

序号	名 称	含量/ ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	重现性限 r	再现性限 R	含量/ ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	重现性限 r	再现性限 R
197	噻啉磷	0.17	0.03	0.04	0.70	0.16	1.19
198	丰泰磷	2.00	0.00	0.00	8.01	1.01	0.74
199	氟啶草酮	13.78	2.96	3.13	55.12	4.64	7.06
200	丁草胺	20.07	1.81	2.05	80.26	5.31	6.62
201	亚胺菌	100.58	26.18	27.99	402.32	20.21	43.76
202	戊叉菌唑	39.02	0.87	0.46	12.08	0.93	2.13
203	苯线磷亚砷	0.74	0.25	0.23	2.96	0.15	0.22
204	啶吩草胺	24.14	7.34	8.15	96.36	7.35	17.58
205	氟啶胺	39.40	4.02	4.08	157.60	9.21	9.84
206	氟啶草酮	0.10	0.06	0.09	0.72	0.12	0.15
207	氟环唑	1.08	0.37	0.30	16.22	3.14	4.60
208	氟辛硫磷	72.62	8.59	10.12	310.30	22.99	25.75
209	苯线磷砷	0.41	0.07	0.11	1.78	0.13	0.43
210	腈苯唑	1.65	0.30	0.27	6.60	0.77	0.62
211	异柳磷	218.62	67.70	87.75	874.69	186.12	1 653.08
212	苯醚菊酯	110.20	160.65	138.67	1 356.80	172.67	219.84
213	吡草磷	9.24	0.87	0.66	36.96	2.75	3.11
214	增效醚	1.13	0.17	0.11	4.53	0.30	0.62
215	乙氧氟草醚	58.85	24.07	11.67	234.19	15.33	324.70
216	氟啶草胺	5.30	2.70	2.23	21.20	4.71	3.22
217	伏杀硫磷	48.04	11.29	9.76	192.16	337.13	1 462.16
218	甲氧虫酰肼	3.70	0.35	0.45	14.80	0.42	3.01
219	丙硫特普	1.73	0.33	0.27	6.92	1.11	0.78
220	乙硫磷	2.96	1.12	1.51	11.82	1.07	1.03
221	丁醚腈	0.28	0.12	0.16	1.12	0.11	0.67
222	氟硫草定	10.40	5.07	2.70	41.60	8.29	6.72
223	螺螨酯	9.91	4.63	4.50	39.62	2.52	24.38
224	唑螨酯	1.36	0.19	0.34	5.44	0.14	0.45
225	胺氟草酯	10.61	2.42	2.42	42.43	9.82	34.10
226	双硫磷	1.22	0.32	0.54	4.86	1.61	8.45
227	氟丙啶草酯	9.50	1.22	1.24	38.00	2.42	4.74
228	多杀菌素	0.57	0.15	0.11	2.27	0.69	0.97
D 组							
229	甲呱金翁	0.90	0.25	0.17	3.60	0.49	4.45

表 D.1 (续)

序号	名 称	含量/ ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	重现性限 r	再现性限 R	含量/ ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	重现性限 r	再现性限 R
230	二丙烯草胺	41.04	14.83	32.21	164.16	97.54	132.11
231	三环唑	10.40	5.07	2.70	41.60	8.29	6.72
232	苯噻草酮	6.36	0.91	1.66	25.44	4.02	2.90
233	异丙隆	0.14	0.03	0.04	0.54	0.23	0.33
234	秀去通	0.18	0.04	0.05	0.73	0.06	0.03
235	敌草净	0.17	0.03	0.09	0.68	0.08	0.04
236	赛克津	0.54	0.10	0.19	2.16	1.21	1.35
237	DMST	40.00	5.67	6.85	160.00	12.76	14.96
238	环草敌	4.44	0.59	0.77	17.76	0.73	1.19
239	秀去净	0.36	0.08	0.08	1.44	0.27	0.34
240	丁草敌	302.00	52.55	65.42	1 208.00	193.58	238.14
241	吡蚜酮	34.28	5.86	5.52	137.12	11.88	8.02
242	氯草敏	2.33	0.88	0.89	9.31	0.95	15.98
243	菜草畏	207.20	27.26	51.95	828.80	55.42	130.69
244	乙硫苯威	4.92	2.78	3.00	19.68	11.87	4.83
245	特丁通	0.10	0.39	0.25	0.38	0.04	0.07
246	环丙津	0.04	0.01	0.01	0.17	0.01	0.02
247	阔草净	0.96	0.15	0.28	3.84	0.33	0.46
248	木草隆	0.22	0.09	0.14	0.87	0.13	0.16
249	草达津	0.60	0.06	0.07	2.42	0.32	0.29
250	另丁津	0.31	0.12	0.17	1.26	0.08	0.07
251	畜虫避	222.40	16.42	17.45	889.60	120.26	165.33
252	牧草胺	0.14	0.02	0.04	0.54	0.06	0.04
253	久效威亚矾	8.29	1.56	3.35	33.18	16.50	19.47
254	杀螟丹	2 080.00	464.53	878.35	8 320.00	2 563.06	1 803.03
255	虫螨畏	2 423.70	57.80	109.44	9 694.78	7 058.24	9 993.29
256	虫线磷	22.68	24.54	32.71	90.72	4.83	7.92
257	利谷隆	11.63	17.60	18.58	46.54	10.02	11.09
258	庚虫磷	5.84	1.36	1.25	23.36	1.83	2.22
259	苄草丹	0.37	0.07	0.11	1.47	0.21	0.30
260	杀草净	0.27	0.05	0.06	1.08	0.11	0.19
261	禾草丹	3.30	0.28	0.76	13.20	0.60	1.90
262	三异丁基磷酸盐	3.58	0.73	1.69	14.32	0.01	0.10
263	三丁基磷酸酯	0.37	0.03	0.08	1.50	0.10	0.14

表 D.1 (续)

序号	名 称	含量/ ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	重现性限 r	再现性限 R	含量/ ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	重现性限 r	再现性限 R
264	乙萘威	2.00	0.35	0.47	8.00	1.45	1.11
265	硫线磷	1.15	0.19	0.54	4.61	1.62	2.49
266	吡唑草胺	0.98	0.08	0.15	3.92	0.32	0.49
267	胺丙畏	54.00	20.25	18.17	216.00	26.05	39.74
268	特丁硫磷	2 240.00	546.61	352.81	8 960.02	3 957.94	7 185.61
269	砒啶唑	2.94	0.19	0.25	11.76	0.81	0.33
270	三唑酮	7.88	0.81	0.98	31.52	1.99	2.49
271	甲拌磷磷	42.00	12.56	31.73	168.00	11.56	18.55
272	十三吗啉	2.60	0.44	0.87	10.42	3.53	5.93
273	苯噻酰草胺	2.21	0.26	0.48	8.83	0.58	0.99
274	苯线磷	0.21	0.08	0.17	0.83	3.64	3.39
275	丁苯吗啉	0.18	0.29	0.21	0.74	0.45	0.32
276	戊唑醇	2.23	1.73	1.58	8.93	0.52	1.07
277	异丙乐灵	30.00	9.05	7.17	120.00	32.73	31.95
278	氟苯嘧啶醇	1.00	0.24	0.43	3.98	1.98	2.60
279	乙炔酚磷酸酯	0.70	0.23	0.46	2.80	1.04	0.56
280	保棉磷	1 104.33	73.21	144.60	4 417.34	369.09	286.02
281	丁基嘧啶磷	0.13	0.03	0.03	0.52	0.05	0.07
282	稻丰散	92.35	10.74	13.20	369.41	32.31	39.35
283	治螟磷	2.60	0.63	0.78	10.40	1.18	1.16
284	硫丙磷	5.84	1.68	3.34	23.36	5.15	4.17
285	苯硫磷	33.00	4.58	7.94	132.00	12.23	16.19
286	烯唑醇	1.34	0.60	1.87	5.38	1.18	1.67
287	稀禾啉	89.6	0.09	0.07	35.84	0.24	0.25
288	纹枯灵	0.27	0.09	0.07	1.09	0.24	0.25
289	灭蚜磷	19.60	1.92	1.37	78.40	5.86	3.83
290	苯草酮	0.32	0.03	0.04	1.28	0.44	0.35
291	马拉硫磷	5.64	0.94	1.90	22.58	1.24	1.36
292	腈草畏	0.34	0.11	0.06	1.36	0.15	0.07
293	哒嗪硫磷	0.87	0.58	0.52	3.49	0.22	0.39
294	噻啉磷	0.05	0.01	0.01	0.19	0.15	0.02
295	硫双威	39.37	5.31	14.52	157.47	160.48	155.09
296	吡啶硫磷	1.00	0.16	0.15	4.02	0.68	0.88
297	噻呋酰胺	8.44	1.17	0.91	33.76	1.11	1.19

表 D.1 (续)

序号	名 称	含量/ ($\mu\text{g/kg}$)	重现性限 r	再现性限 R	含量/ ($\mu\text{g/kg}$)	重现性限 r	再现性限 R
298	四氟醚唑	1.72	1.63	1.23	6.88	0.28	0.67
299	吡唑解草酯	12.56	1.46	1.77	50.24	1.76	3.29
300	丙溴磷	2.02	0.26	0.40	8.06	1.26	1.10
301	百克敏	0.51	0.09	0.19	2.02	0.57	0.57
302	烯酰吗啉	0.35	0.14	0.31	1.41	1.62	1.45
303	噻唑菊酯	3.33	0.45	0.76	13.31	0.99	1.16
304	噻唑烟酸	1.96	0.38	0.41	7.84	0.92	1.11
305	氟啶脲	5.68	5.15	8.74	34.72	3.82	10.64
E 组							
306	4-氨基吡啶	0.03	0.04	0.21	0.12	0.05	0.09
307	灭多威	0.32	0.06	0.08	1.27	0.08	0.14
308	咯嗪酮	0.12	0.03	0.03	0.46	0.03	0.06
309	麦穗灵	0.06	0.01	0.01	0.25	0.03	0.05
310	丁腈酰胺	0.04	0.01	0.01	0.23	0.04	0.02
311	丁酮威	0.05	0.03	0.02	0.21	0.09	0.13
312	杀虫脒	0.04	0.01	0.01	0.18	0.02	0.01
313	霜脲氯	1.85	0.22	0.26	7.41	1.33	1.61
314	氟硫酰草胺	0.29	0.25	0.42	1.18	0.36	0.45
315	灭害威	0.53	0.08	0.04	2.19	0.33	0.66
316	氧乐果	0.32	0.06	0.11	1.29	0.10	0.28
317	乙氧嘧啶	0.12	0.04	0.09	0.47	0.14	0.20
318	涕灭威砒	0.71	0.13	0.55	2.85	0.29	0.46
319	二氧威	0.11	0.03	0.03	0.45	0.10	0.13
320	甲基内吸磷	0.18	0.04	0.04	0.71	0.33	0.40
321	杀虫脒	0.1	0.19	0.55	40.4	0.49	0.05
322	甲基乙拌磷	19.27	14.45	26.59	72.07	36.80	46.72
323	灭茵丹	4.62	0.70	1.20	18.48	3.92	4.13
324	甲基内吸磷砒	0.66	0.07	0.13	2.63	0.43	0.47
325	苯锈定	0.01	0.00	0.00	0.02	0.02	0.04
326	赛硫磷	21.93	13.55	23.85	87.73	0.00	0.00
327	甲咪唑烟酸	0.20	0.00	0.00	0.79	0.01	0.01
328	对氧磷	0.02	0.01	0.01	0.06	0.01	0.00
329	4-十二烷基-2,6-二甲基 吗啉	3.16	0.06	0.07	12.64	0.10	0.10

表 D.1 (续)

序号	名 称	含量/ ($\mu\text{g/kg}$)	重现性限 r	再现性限 R	含量/ ($\mu\text{g/kg}$)	重现性限 r	再现性限 R
330	乙烯菌核利	0.06	0.01	0.13	0.34	0.13	0.21
331	烯效唑	0.08	0.01	0.01	0.32	0.03	0.04
332	啉斑肟	0.01	0.00	0.01	0.04	0.00	0.01
333	氯硫磷	133.6	0.02	0.04	534.4	0.01	0.02
334	异氯磷	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02
335	四螨嗪	0.03	0.01	0.01	0.10	0.02	0.04
336	氟草敏	0.01	0.00	0.02	0.03	0.01	0.01
337	野麦畏	1.54	0.16	0.24	6.46	0.56	12.51
338	苯氧噻琳	5.11	0.53	0.48	20.45	1.53	0.84
339	倍硫磷砒	0.58	140.17	188.62	2.33	1.19	1.16
340	氟咯草酮	0.03	0.01	0.01	0.17	0.02	0.02
341	联酸苯甲基丁酯	21.02	1.32	10.81	84.27	36.15	48.02
342	氯唑磷	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
343	除线磷	1.01	0.32	0.25	4.03	0.72	1.50
344	啉灭多威	15.67	0.20	9.71	63.47	22.87	27.93
345	特丁硫磷砒	2.95	0.33	0.26	11.81	1.02	1.31
346	敌乐胺	0.06	0.02	0.02	0.24	0.07	0.03
347	氯霜唑	0.17	0.07	0.05	0.67	0.00	0.00
348	毒壤磷	2.29	0.59	1.48	8.91	1.57	3.29
349	呋啉菊酯-2	0.01	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
350	啉醚脒胺	0.16	0.03	0.02	0.63	0.04	0.05
351	甲磺乐灵	1.15	0.42	0.40	4.59	1.13	0.87
352	甲氧菊酯	10.45	0.82	1.46	41.81	12.04	17.93
353	噻螨磷	0.79	0.09	0.13	3.15	0.50	0.78
354	苯腈特	0.66	0.03	0.15	2.62	0.76	1.09
355	新燕灵	10.27	0.90	1.82	41.07	4.74	2.79
356	啉噻醚	0.47	0.12	0.30	1.87	1.72	0.91
357	呋线威	0.06	0.01	0.02	0.26	0.02	0.02
358	反式氯菊酯	0.16	0.03	0.04	0.64	3.77	3.30
359	醚菊酯	76.00	8.90	20.80	304.00	120.52	206.54
360	呋草唑	0.01	0.01	0.02	0.04	0.01	0.01
361	啉唑螨	0.26	0.42	0.72	1.04	0.07	0.11
362	2-氯氧菊酯	0.02	0.01	0.01	0.09	0.03	0.03
363	氟吡乙禾灵	0.08	0.02	0.02	0.33	0.06	0.11

表 D.1 (续)

序号	名 称	含量/ ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	重现性限 r	再现性限 R	含量/ ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	重现性限 r	再现性限 R
364	S-氰戊菊酯	208.00	0.10	16.79	416.00	30.70	33.66
365	乙梭氟草醚	0.17	0.05	0.04	0.67	0.00	0.00
366	氟胺卞菊酯	7.67	2.58	4.29	30.67	13.79	20.05
F 组							
367	丙烯肟胺	5.93	1.36	3.47	23.73	2.38	3.77
368	叔丁基胺	30.96	0.02	0.04	155.84	0.10	0.20
369	噻露灵	74.71	22.57	54.79	298.85	10.33	8.22
370	邻苯二甲酰亚胺	14.33	5.45	5.19	57.33	13.31	21.32
371	甲氟磷	22.73	1.99	10.17	90.93	31.56	32.76
372	速灭威	8.47	94.95	337.11	33.87	6.56	13.08
373	二苯胺	0.14	0.04	0.10	0.55	0.08	0.05
374	1-萘基乙酰胺	0.27	0.05	0.06	1.08	0.12	0.17
375	脱乙基莠去津	0.21	0.10	0.23	0.83	31.82	32.09
376	2,6-二氯苯甲酰胺	1.50	0.13	0.15	6.00	0.31	1.13
377	涕灭威	87.00	39.43	40.72	348.00	101.73	76.49
378	邻苯二甲酸二甲酯	4.40	3.73	4.40	17.60	27.48	45.37
379	杀虫脒盐酸盐	0.88	0.19	0.25	3.52	0.00	0.00
380	西马通	0.37	0.05	0.07	1.47	0.27	0.21
381	吡草胺	3.39	2.26	1.49	13.57	4.69	5.55
382	克草敌	1.13	0.35	0.45	4.53	1.36	1.31
383	活化酯	1.03	9.58	11.14	4.11	23.37	23.50
384	蔬果磷	4.61	5.18	3.62	18.45	3.69	7.54
385	杀线威	162.69	147.94	161.36	730.75	124.70	93.89
386	甲基苯噻隆	0.02	0.01	0.01	0.10	0.02	0.02
387	丁酮砜威	8.87	8.36	5.96	35.47	5.51	13.06
388	自克威	0.31	0.20	0.62	1.25	0.00	0.00
389	甲基内吸磷亚砷	1.31	0.00	0.00	5.23	0.14	0.39
390	久效威砷	8.03	14.58	7.16	32.11	7.38	11.58
391	硫环磷	0.16	0.06	0.04	0.65	0.16	0.33
392	硫赶内吸磷	160.00	0.02	0.04	640.00	0.30	0.03
393	氧倍硫磷	0.40	0.13	0.22	1.58	0.32	0.24
394	泰丙胺	0.42	0.07	0.08	1.70	0.32	0.23
395	杀螟硫磷	8.93	1.92	2.46	35.73	5.46	4.16
396	酞酸二丁酯	13.20	8.95	10.23	52.80	2.30	95.15

表 D.1 (续)

序号	名 称	含量/ ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	重现性限 r	再现性限 R	含量/ ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	重现性限 r	再现性限 R
397	丙草胺	0.13	0.02	0.02	0.52	0.09	0.11
398	腐霉利	28.87	3.37	4.21	115.47	14.77	10.24
399	蚜灭磷	1.52	0.72	1.05	6.08	1.00	0.87
400	枯草隆	0.15	0.10	0.19	0.59	0.01	0.01
401	威菌磷	0.005	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
402	右旋炔丙菊酯	19.60	53.59	28.67	78.40	33.92	17.61
403	可灭磷	0.44	0.06	0.09	1.76	0.26	0.27
404	甲氧咪草烟	1.80	0.02	0.04	7.20	0.40	0.06
405	杀鼠灵	0.89	0.25	0.92	3.57	0.83	1.01
406	亚胺硫磷	5.91	4.96	6.29	23.63	4.13	2.71
407	皮蝇磷	4.38	2.16	1.81	17.51	4.83	5.65
408	除虫菊酯	11.93	2.75	3.23	47.73	11.84	10.85
409	phthalic acid, bicyclo- hexyl ester	0.23	0.04	0.03	0.90	0.14	0.08
410	环丙酰肼胺	1.73	2.32	1.82	6.93	1.29	1.59
411	吡啶胺	0.26	0.02	0.04	1.04	0.10	0.01
412	虫螨磷	10.60	1.99	2.35	42.40	5.58	5.45
413	氯亚胺硫磷	52.33	9.75	15.39	209.33	17.72	20.33
414	吡啶酮草酯	4.86	0.18	6.71	19.44	3.07	2.57
415	鱼藤酮	0.77	0.20	0.20	3.09	0.73	0.58
416	亚胺唑	3.42	0.66	0.66	13.68	2.75	1.72
417	噁草酸	0.41	0.12	0.16	1.65	0.36	0.38
418	乳氟禾草灵	20.67	4.76	3.15	82.67	8.77	10.44
419	吡草酮	0.03	0.05	0.04	0.11	0.01	0.02
420	地乐酯	13.76	6.88	15.34	55.04	29.38	25.10
421	异丙草胺	0.27	0.12	0.16	1.07	0.26	0.28
422	氟硅菊酯	202.67	1.99	1.24	810.67	0.02	0.04
423	乙氧苯草胺	0.27	0.17	0.27	1.07	0.39	0.45
424	四唑嘧草胺	4.13	1.13	1.46	16.53	3.62	1.45
425	五氯苯胺	1.25	0.68	1.05	4.99	0.12	0.16
426	丁硫克百威	0.80	0.02	0.04	3.20	0.45	0.39
427	苯醚氟菊酯	5.60	2.45	1.76	22.40	9.87	14.89
428	噁唑隆	1.33	2.31	1.72	5.33	0.14	0.39
429	马拉氧磷	1.56	0.95	1.42	6.25	0.00	0.00

表 D.1 (续)

序号	名 称	含量/ ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	重现性限 r	再现性限 R	含量/ ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	重现性限 r	再现性限 R
430	氟杀螨酮	0.80	0.02	0.04	3.20	0.12	0.16
431	多果定	2.67	1.31	2.21	10.67	0.02	0.04
G 组							
432	茅草枯	230.74	124.97	88.13	922.96	75.17	65.96
433	2-苯基苯酚	169.88	40.10	60.66	679.52	117.78	105.55
434	3-苯基苯酚	4.00	0.95	1.43	16.01	2.78	2.49
435	氯硝胺	48.56	23.41	25.48	194.23	23.98	21.69
436	氟苯胺灵	15.73	3.03	3.71	63.07	6.94	16.27
437	特草定	0.88	0.89	0.86	3.51	0.89	0.97
438	2,4-滴	11.86	0.02	0.01	47.44	0.02	0.02
439	咯菌腈	62.16	52.19	68.94	248.64	212.53	162.46
440	杀螨醇	164.39	15.90	20.07	657.20	129.93	469.45
441	蔡草胺	1.95	0.10	0.09	7.78	0.07	0.12
442	灭幼脉	20.40	35.81	39.36	81.60	18.66	19.98
443	氟毒素	3.88	1.51	1.60	15.52	2.47	2.29
444	噻唑菌酮	45.29	8.25	8.19	181.15	18.44	23.31
445	吡氟酰草胺	28.27	2.33	4.38	113.09	6.84	5.87
446	氟氟唑	39.85	4.95	1.55	159.41	26.37	36.71
447	氟啶胺	70.60	8.71	6.15	282.40	21.33	25.17
448	克米范	9 642.82	162.54	2 751.07	38 571.28	6 447.21	8 321.12

附录 E
(资料性附录)

448 种农药及相关化学品英文中文名称对照索引(按英文字母顺序)

448 种农药及相关化学品英文中文名称对照索引(按英文字母顺序)见表 E.1。

表 E.1 448 种农药及相关化学品英文中文名称对照索引(按英文字母顺序)

序号	英文名称	中文名称	附录 A 中序号	序号	英文名称	中文名称	附录 A 中序号
1	1-naphthyl acetamide	1-萘基乙酰胺	374	27	atrazine-desethyl	脱乙基莠去津	375
2	2,4-D	2,4-滴	438	28	azinphos ethyl	益棉磷	60
3	2,6-dichlorobenzamide	2,6-二氯苯甲酰胺	376	29	azinphos methyl	保棉磷	280
4	2-phenylphenol	2-苯基苯酚	433	30	aziprotryne	叠氮津	11
5	3,4,5-trimethazolin	3,4,5-三甲唑啉	2	31	azoxystrobin	啉菌酯	71
6	3-phenylphenol	3-苯基苯酚	434	32	benalaxyl	苯霜灵	51
7	4,4-dichlorobenzophenone	4,4-二氯苯甲酮	21	33	bendocarb	噁虫威	89
8	4-aminopyridine	4-氨基吡啶	506	34	benodanil	麦锈灵	48
9	6-chloro-2-hydroxy-3-phenyl-pyridazin	6-氯-2-羟基-3-苯基吡嗪	83	35	benoxacor	解草酮	179
10	acetamiprid	啉虫脒	162	36	bensulfide	地散磷	69
11	acetochlor	乙草胺	27	37	benzofenop	吡草酮	419
12	acibenzolar-methyl	活化酯	383	38	benzoximate	苯满特	354
13	acifluorfen	苯草酮	190	39	benzoylprop-ethyl	新燕灵	355
14	acrylamide	丙烯酰胺	367	40	intenazole	联苯吡酯	117
15	aldicarb	涕灭威	377	41	bioallethrin	生物丙烯菊酯	121
16	aldicarb sulfone	涕灭威砜	318	42	bioresmethrin	生物卡呋菊酯	136
17	aldimorphs	4-氨基-2,6-二甲基吗啉	329	43	bitertanol	联苯三唑醇	58
18	allethrin	烯丙菊酯	42	44	boscalid	啉酰菌胺	350
19	allidochlor	二丙烯草胺	230	45	bromacil	除草定	180
20	ametryn	闾草净	247	46	bromfeninfos	溴苯烯磷	70
21	amidithion	赛硫磷	326	47	bromophos-ethyl	乙基溴硫磷	68
22	aminocarb	灭害威	315	48	brompyrazon	溴秀敏	182
23	anilofos	苄磷	64	49	bromuconazole	糠菌唑	144
24	aspon	丙硫特普	219	50	bupirimate	乙噁唑磷酯	279
25	atrazine	莠去通	234	51	buprofezin	噁嗪酮	124
26	atrazine	莠去津	239	52	butachlor	丁草胺	200
				53	butafenacil	氟丙噁草酯	227
				54	butocarboxim	丁腈威	311
				55	butoxycarboxim	丁腈砜威	387

表 E.1 (续)

序号	英文名称	中文名称	附录 A 中序号	序号	英文名称	中文名称	附录 A 中序号
55	butralin	仲丁灵	38	89	clodinafop propargyl	炔草酸	61
57	buturon	播土隆	14	90	clofentezine	四螨嗪	335
58	butylate	丁草敌	240	91	clomazone	异噁草松	17
59	cadusafos	硫线磷	265	92	cloquintocet mexyl	解草酯	57
60	carbaryl	甲萘威	5	93	clothianidin	噻虫胺	95
61	carbendazim	多菌灵	82	94	coumatetralyl	杀鼠醚	113
62	carbetamide	双酰草胺	15	95	crimidine	鼠立克	80
63	carbofuran	克百威	161	96	crufomate	育蓄磷	111
64	carbosulfan	丁硫克百威	426	97	cumyluron	可灭隆	403
65	carboxin	萎锈灵	94	98	cyanazine	氰草津	18
66	carpropamid	环丙酰肼胺	410	99	cyanofenphos	苯腈磷	122
67	cartap hydrochloride	杀螟丹	254	100	cyanophos	杀虫酯	321
68	chloramphenicol	氯霉素	443	101	cyazofamid	氰霜唑	347
69	chlorbenside sulfone	氯杀螨虱	430	102	cycloate	环草敌	238
70	chlorbufam	氯草灵	88	103	cycluron	环莠隆	4
71	chlordimeform	杀虫脒	312	104	cymoxanil	霜脍氰	313
72	chlordimeform hydrochloride	杀虫脒盐酸盐	379	105	cyphenothrin	苯醚氰菊酯	427
73	chlorfenethol	杀螨醇	440	106	cyprazine	环丙津	246
74	chlorfluazuron	氟啶脲	305	107	cyproconazole	环丙唑醇	109
75	chloridazon	氟草敏	242	108	cyprodinil	噻菌灵胺	13
76	chlormephos	氟甲硫磷	93	109	cythioate	赛灭磷	114
77	chlorobenzuron	灭幼脲	442	110	dalapon	茅草枯	432
78	chlorotoluron	绿麦隆	86	111	daminozide	丁酰肼	76
79	chloroxuron	枯草隆	400	112	dazomet	棉隆	77
80	chlorphoxim	氟辛硫磷	208	113	DEF	脱叶磷	128
81	chlorpyrifos methyl	甲基毒死蜱	59	114	demeton(o+x)	内吸磷	178
82	chlorpropham	氟苯胺灵	436	115	demeton-s	硫赶内吸磷	392
83	chlorpyrifos	毒死蜱	138	116	demeton-s-methyl	甲基内吸磷	320
84	chlorsulfuron	氯磺隆	140	117	demeton-s-methyl sul- fone	甲基内吸磷砜	324
85	chlorthiamid	氯硫酰草胺	314	118	demeton-s-methyl sul- foxide	甲基内吸磷亚砜	389
86	chlorthion	氯硫磷	333	119	dialfenthion	丁硫磷	221
87	chlorthiophos	虫螨磷	412	120	dialifos	氟亚胺硫磷	413
88	cinidon-ethyl	吲哚啉草酯	414				

表 E.1 (续)

序号	英文名称	中文名称	附录 A 中序号	序号	英文名称	中文名称	附录 A 中序号
121	diallate	燕麦敌	26	155	DMST	—	237
122	diazinon	二嗪磷	43	156	dodine	多果定	431
123	dibutyl succinate	畜虫避	251	157	edifenphos	敌瘟磷	44
124	dicapthion	异氰磷	334	158	EPN	苯硫磷	285
125	dichlofenthion	除线磷	343	159	epoxiconazole	氟环唑	207
126	dichlofluanid	抑菌灵	56	160	EPTC	雷草敌	153
127	diclobutrazole	干氯三唑醇	52	161	esfenvalerate	S-氟戊菊酯	363
128	dicloran	氯硝胺	435	162	etaconazole	乙环唑	53
129	dicrotophos	百治磷	169	163	ethidimuron	磺噻隆	24
130	diethofencarb	乙霉威	264	164	ethiofencarb	乙硫苯威	244
131	diethyltoluamide	避蚊胺	154	165	ethion	乙硫磷	220
132	diffenican	吡氟醚草胺	445	166	ethiprole	氟吡唑	446
133	dimefox	甲氧磷	371	167	ethofume sate	乙氧呋草黄	106
134	dimefuron	噻唑隆	428	168	ethoprophos	灭线磷	172
135	dimethachloro	二甲草胺	97	169	ethoxyquin	乙氧喹啉	317
136	dimethametryn	阔草净	176	170	ethylene thiourea	乙撑硫脲	75
137	dimethenamid	二甲胺草胺	30	171	etobenzanid	乙氧苯草胺	423
138	dimethoate	乐果	167	172	etofenprox	醚菊酯	359
139	dimethomorph	烯啶吡啉	302	173	etridiazol	土菌灵	174
140	dimethyl phthalate	邻苯二甲酸二甲酯	378	174	etrimfos	乙啶硫磷	112
141	diniconazole	烯啶唑醇	286	175	famoxadone	噻唑菌酮	444
142	dinitramine	敌乐胺	346	176	famphur	氟磷磷	50
143	dinoseb acetate	地乐酯	420	177	fenamiphos	苯线磷	274
144	dinotefuran	呋草胺	381	178	fenamiphos sulfone	苯线磷砜	209
145	dioxabenzolol	氟苯磷	384	179	fenamiphos sulfoxide	苯线磷亚砜	203
146	dioxacarb	二氧威	319	180	fenarimol	氟苯啶啉醇	54
147	diphenamid	双苯胺草胺	171	181	fenazaquin	啶啉醚	126
148	diphenylamin	二苯胺	373	182	fenbuconazole	腈苯唑	210
149	dipropetryn	杀草净	260	183	fenfuram	黑眼胺	157
150	disulfoton	乙拌磷	185	184	fenhexamid	环硫酰胺	118
151	disulfoton sulfone	乙拌磷砜	125	185	fenitrothion	杀螟硫磷	395
152	disulfoton-sulfoxide	乙拌磷亚砜	191	186	fenobucarb	仲丁威	159
153	dithiopyr	氟硫草定	222	187	fenoxanil	氟菌胺	205
154	diuron	敌草隆	92	188	fenoxycarb	苯氧威	196

表 E.1 (续)

序号	英文名称	中文名称	附录 A 中序号	序号	英文名称	中文名称	附录 A 中序号
189	fenpropathrin	甲氰菊酯	352	223	fosthiazate	噻唑硫磷	189
190	fenpropidin	苯锈定	325	224	fuberidazole	麦穗灵	309
191	fenp-opimorph	丁苯吗琳	275	225	furalaxyl	抑菌丙胺酯	120
192	fenpyroximate	噻螨酯	224	226	furathiocarb	呋线威	357
193	fensulfenthin	丰索磷	198	227	haloxyfop-2-ethoxy-ethyl	氟吡乙禾灵	362
194	fenthion	倍硫磷	186	228	haloxyfop-methyl	精氟吡甲禾灵	66
195	fenthion oxon	氧倍硫磷	393	229	heptanophos	庚虫磷	258
196	fenthion sulfone	倍硫磷砜	339	230	hexaflumuron	氟铃脲	148
197	fenthion sulfoxide	倍硫磷亚砜	36	231	hexazinone	环嗪酮	175
198	fentraxamide	四唑吡草胺	424	232	hexythiazox	噻嗪酮	353
199	fenuron	非草隆	74	233	hypoxazol	噻霉灵	369
200	flamprop isopropyl	麦草氟异丙酯	143	234	imazathiaz	抑芽唑	193
201	flamprop methyl	甲基麦草氟异丙酯	143	235	imazamethabenz-methyl	甲基咪草酯	190
202	flusazifop butyl	精吡唑草隆	67	236	imazamox	甲氧咪草烟	404
203	flusazinam	氟吡啉胺	44	237	imazapic	甲咪唑烟酸	327
204	flubenzimine	噻唑嗪	361	238	imazethapyr	咪唑乙烟酸	34
205	fluchloralin	氯乙氟灵	130	239	imibenzoxazole	亚胺唑	416
206	fludioxonil	咯菌腈	439	240	imibenzoxazole-des-benzyl	脱苯甲基亚胺唑	102
207	flufenacet	氟噻草胺	211	241	imidacloprid	吡虫啉	23
208	flufenoxuron	吡虫脒	74	242	indoxacarb	茚虫威	74
209	flumiclorac-pentyl	胺草酯	325	243	iprobensos	异丙肟净	107
210	fluometuron	伏草隆	168	244	iprovalicarb	丙森唑	47
211	fluorochloridone	氟咯草酮	199	245	isazofos	氯唑磷	342
212	fluoroglyphen-ethyl	乙胺氟草隆	365	246	isocarbanid	丁腈肟胺	310
213	flurazuron	—	150	247	isofenphos	异柳磷	211
214	fluridone	氟啶草酮	206	248	isomethiozin	丁噻草酮	25
215	flurochloridone	氟咯草酮	340	249	isoprocureb	异丙威	2
216	flurtamone	呋草酮	133	250	isopropalin	异丙乐灵	277
217	flusilazole	氟硅唑	46	251	isoprothiolane	稻瘟灵	192
218	fluthiacet methyl	氟噻乙草酯	146	252	isoproturon	异丙隆	233
219	flutolanil	氟吡啉胺	49	253	isouron	异唑隆	85
220	flutriazol	粉唑醇	119				
221	folpet	灭菌丹	322				
222	fonofos	地虫硫磷	173				

表 E.1 (续)

序号	英文名称	中文名称	附录 A 中序号	序号	英文名称	中文名称	附录 A 中序号
254	isoxaben	异噁唑草胺	132	288	metribuzin	莠灭津	236
255	isoxaflutole	异噁唑草	63	289	mevinphos	速灭磷	10
256	kadethrin	噻啉菊酯	303	290	mexacarbaz	自克威	388
257	kelevan	克来范	448	291	molinate	禾草敌	81
258	kresoxim-methyl	亚胺酯	201	292	monalide	庚酰草胺	170
259	lactofen	乳氟禾草灵	418	293	monolinuron	绿谷隆	9
260	linuron	利谷隆	257	294	naonuron	灭草隆	155
261	malaoxon	马拉氧磷	429	295	myclobutanil	腈菌唑	33
262	malathion	马拉硫磷	291	296	napropamide	萘丙胺	394
263	maleic hydrazide	抑芽丹	151	297	naptalam	萘草胺	441
264	mecarbam	灭蚜磷	289	298	neburon	草不隆	103
265	mefenacet	苯噻唑草胺	373	299	neotime	烟碱	78
266	mefenoxam	精甲霜灵	104	300	nitenpyram	烯啶虫胺	28
267	mefenpyr-dimethyl	吡啉草酯	299	301	niralin	甲磺乐灵	351
268	mepanipyrim	噻菌胺	163	302	norflurazon	氟草唑	336
269	mephosfolan	地安磷	101	303	novaluron	氯醚腈	149
270	mepiquat chloride	甲哌金剂	229	304	nuarimol	氟苯嘧啶醇	278
271	mepronil	灭锈胺	184	305	oxabenzoxyn	敌草净	235
272	metaxyl	甲霜灵	187	306	ofurace	甲吡吡胺	188
273	metamitron	苯噻草酮	232	307	omethoate	氧乐果	316
274	metazachlor	吡啉草胺	266	308	oxamyl	杀线威	385
275	metconazole	叶菌唑	130	309	oxycarboxin	氧化萎锈灵	183
276	methabenzthiazuron	甲基苯噻隆	386	310	oxyfluorfen	乙氧氟草醚	215
277	methacryfos	虫螨畏	255	311	paclobutrazol	多效唑	35
278	methamidophos	甲胺磷	152	312	paraoxon methyl	甲基对氧磷	20
279	methidathion	杀扑磷	41	313	paraoxon ethyl	对氧磷	328
280	methiocarb	甲硫威	165	314	pebulate	克草敌	382
281	methobromuron	溴谷隆	98	315	penconazole	戊菌唑	32
282	methomyl	灭多威	307	316	pencyuron	纹枯胺	288
283	methoprotryne	苄草津	29	317	pentachloroaniline	五氯苯胺	425
284	methoxyfenozide	甲氧虫酰肼	218	318	phenmedipham	甜菜宁	116
285	metolachlor	丙草胺	397	319	phenothiazin	苯噻菌胺	212
286	metolcarb	速灭威	372	320	phenligate	稻丰散	282
287	metoxuron	甲氧隆	166	321	phorate	甲拌磷	99

表 E.1 (续)

序号	英文名称	中文名称	附录 A 中序号	序号	英文名称	中文名称	附录 A 中序号
322	phorate sulfone	甲拌磷磺	271	353	propham	苯胺灵	1
323	phorate sulfoxide	甲拌磷亚磺	181	354	propiconazole	丙环唑	137
324	phosalone	伏杀硫磷	217	355	propisochlor	异丙草胺	421
325	phosfolan	硫环磷	391	356	propoxur	残杀威	84
326	phosmet	亚胺硫磷	406	357	prosulfocarb	苄草丹	259
327	phosphamidon	磷胺	115	358	prothoate	发硫磷	105
328	phoxim	辛硫磷	194	359	pymetrozin	吡蚜酮	241
329	phthalic acid, bicyclohexyl ester	—	409	360	pyraclofos	吡啶硫磷	296
330	phthalic acid, dibutyl ester	酞酸二丁酯	396	361	pyraclostrobin	百克敏	301
331	phthalic acid, benzyl butyl ester	酞酸苯甲基丁酯	341	362	pyrazophos	吡啶磷	72
332	phthalimide	邻苯二甲酰亚胺	370	363	pyrazoxyfen	苄草唑	360
333	picolinalfen	氟吡啶草胺	145	364	pyrethrin	除虫菊酯	408
334	picoxystrobin	啉氧菌酯	297	365	pyributicarb	吡啶羧	292
335	piperonyl butoxide	增效醚	214	366	pyridaphenthion	吡啶硫磷	293
336	piperophos	呱草磷	213	367	pyrifenoxy	啉啉胺	332
337	pirimicarb	抗蚜威	16	368	pyrifthalid	环酯草醚	129
338	pirimiphos methyl	甲基嘧啶磷	123	369	pyrimethanil	啉啉胺	156
339	pirimiphos-ethyl	啉啉磷	294	370	pyrimidifen	啉啉醚	356
340	prallethrin	右旋炔丙菊酯	402	371	pyrimistate	啉啉胺	197
341	pretilachlor	丙草胺	45	372	pyriproxyfen	蚊蝇醚	131
342	procymidone	腐霉利	398	373	pyroquilon	啉啉酮	308
343	profenofos	丙溴磷	300	374	quinalphos	啉啉磷	195
344	prometon	扑灭通	164	375	quinoclamine	灭藻胺	158
345	prometryne	扑草净	19	376	quinoxiphen	苯氧喹啉	338
346	pronamide	拿草特	96	377	quizalofop-ethyl	啉禾灵	65
347	propachlor	毒草胺	6	378	rabenzazole	吡啶唑	7
348	propanil	敌稗	160	379	resmethrin-2	苄啉菊酯-2	349
349	propaquizafop	啉草酸	417	380	ronnel	皮蝇磷	407
350	propargite	炔腈特	143	381	rotenone	鱼藤酮	415
351	propazine	扑灭津	90	382	sebutylazine	另丁津	250
352	propetamphos	胺丙畏	267	383	secbumeton	密草通	12
				384	sethoxydim	稀禾啉	287
				385	silaflofen	氟啉菊酯	422
				386	simeconazole	啉啉唑	269

表 E.1 (续)

序号	英文名称	中文名称	附录 A 中序号	序号	英文名称	中文名称	附录 A 中序号
387	simeton	西玛通	380	418	thiodicarb	硫双威	295
388	simetryn	西草净	8	419	thiofanox	久效威	87
389	spinosad	多杀菌素	228	420	thiofanox sulfone	久效威磺	390
390	spirodiclofen	螺螨酯	223	421	thiofanox-sulfoxide	久效威亚磺	253
391	spiroxamine	螺螨茂胺	39	422	thiometon	甲基乙拌磷	322
392	sulfallate	莱草畏	243	423	thionazin	虫线磷	256
393	sulfotep	治螟磷	283	424	tolclofos methyl	甲基立枯磷	10
394	sulprofos	硫丙磷	284	425	tralkoxydim	苯草酮	290
395	tau-fluvalinate	氟胺氟菊酯	366	426	trans-permethrin	反式氯菊酯	358
396	tebuconazole	戊唑醇	276	427	triadimeton	三唑酮	270
397	tebufenpyrad	吡蚜胺	411	428	triadimenol	三唑醇	37
398	tebupirimfos	丁基嘧啶磷	281	429	triallate	野麦畏	337
399	tebutam	牧草胺	252	430	triamphos	威菌磷	401
400	tebuthiuron	木草隆	248	431	triazophos	三唑磷	127
401	temphos	双硫磷	226	432	trichloronat	毒壤磷	348
402	TEPP	特普	108	433	trichlorphon	敌百虫	177
403	terbacil	特草定	437	434	tricyclazole	三环唑	231
404	terbufos	特丁硫磷	268	435	tridemorph	十三吗啉	272
405	terbufos sulfone	特丁硫磷磺	345	436	trietazine	草达津	249
406	terbumeton	特丁通	245	437	trifloxystrobin	肟菌酯	147
407	terbuthylazine	特丁津	91	438	triflunuron	杀铃脲	62
408	terbucarb	特草灵	31	439	trifluralin	氟乐灵	134
409	tert-butylamine	叔丁基胺	368	440	tri- <i>is</i> -butyl phosphate	三异丁基磷酸盐	262
410	tetrachlorvinphos	杀虫畏	142	441	tri- <i>n</i> -butyl phosphate	三丁基磷酸酯	263
411	tetraconazole	四氟醚唑	298	442	triticonazole	戊叉菌唑	202
412	tetramethrin	胺菊酯	55	443	uniconazole	烯效唑	331
413	thenylchlor	噻吩草胺	204	444	varidothion	蚜灭磷	399
414	thiacloprid	噻虫啉	22	445	varidothion sulfone	蚜灭多磺	344
415	thiamethoxam	噻虫啉	110	446	vinclazolin	乙炔苄核利	330
416	thiazopyr	噻唑吡啶	304	447	warfarin	杀鼠灵	405
417	thiobencarb	禾草丹	261	448	zeta-cypermethrin	Z-氯氰菊酯	364

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
茶叶中 448 种农药及相关化学品
残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
GB/T 23205—2008

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

网址 www.spc.net.cn

电话: 68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

开本 880×1230 1/16 印张 5.25 字数 154 千字
2009 年 4 月第一版 2009 年 4 月第一次印刷

书号: 155066·1-36551 定价 50.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 68533533



GB/T 23205—2008